



AUFBEREITUNGSSCHRITTE

4 Freigabe
der Beladung >



4

Freigabe der Beladung

4.1 BESTÄTIGUNG DER FREIGABE

Bestätigung, dass der Zyklus ohne Fehler oder Alarme abgeschlossen wurde.

- Keine Fehlercodes oder Alarme auf dem Bildschirm.
- Keine Fehlercodes oder Alarme im Ausdruck.

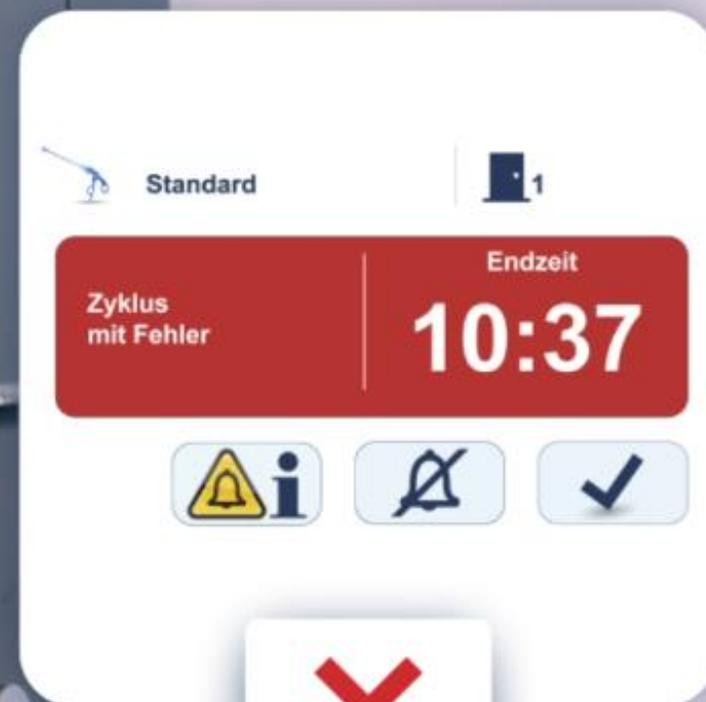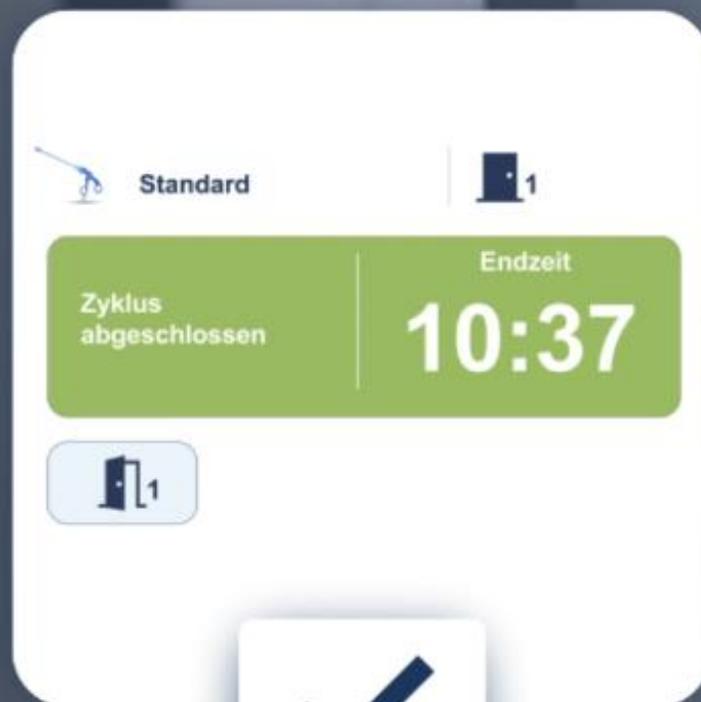

4

Freigabe
der Beladung4.1 BESTÄTIGUNG DER
FREIGABE

Bestätigung, dass der Zyklus ohne Fehler oder Alarme abgeschlossen wurde.

- Keine Fehlercodes oder Alarme auf dem Bildschirm.
- Keine Fehlercodes oder Alarme im Ausdruck.

Start: 08-01-2020 09:55:01
 Cycle duration: 00:40:24
 Ster. Duration: 00:24:24

KEINE VORFÄLLE

00:00:00 T 55.5°C P 1028.0hPa
 00:40:25 T 55.6°C P 1027.8hPa
 CYCLE END



2018 18:49:09
00:41:57

TEST SIN INCIDENCIAS

PROCESO EN MARCHA

P[hPa]
1007.2
1007.1

Start: 09-01-2020 15:55:12
 Cycle duration: 00:17:23
 Ster. Duration: 00:06:19

MIT VORFÄLLEN

00:00:00 T 54.2°C P 1023.1hPa
 CYCLE END
 00:24:15 T 55.6°C P 1021.8hPa
 W48 Cycle with fault



4

Freigabe der Beladung

4.2 ÖFFNEN DER TÜR

- Tippen Sie auf das Türsymbol, um die Tür zu entriegeln.
- Die Tür wird automatisch entriegelt.
- Tragen Sie stets Handschuhe und öffnen Sie die Tür manuell.



4

Freigabe der Beladung

4.2 ÖFFNEN DER TÜR

- Tippen Sie auf das Türsymbol, um die Tür zu entriegeln.
- Die Tür wird automatisch entriegelt.
- Tragen Sie stets Handschuhe und öffnen Sie die Tür manuell.



4

Freigabe der Beladung

4.2 ÖFFNEN DER TÜR

- Tippen Sie auf das Türsymbol, um die Tür zu entriegeln.
- Die Tür wird automatisch entriegelt.
- Tragen Sie stets Handschuhe und öffnen Sie die Tür manuell.



4

Freigabe der Beladung

4.3 ENTNEHMEN DER BELADUNG

- Ziehen Sie das Fach zur Einfachheit heraus.
- Platzieren Sie sie zur Inspektion auf dem Tisch.




4

Freigabe der Beladung

4.3 ENTNEHMEN DER BELADUNG

- Ziehen Sie das Fach zur Einfachheit heraus.
- Platzieren Sie sie zur Inspektion auf dem Tisch.

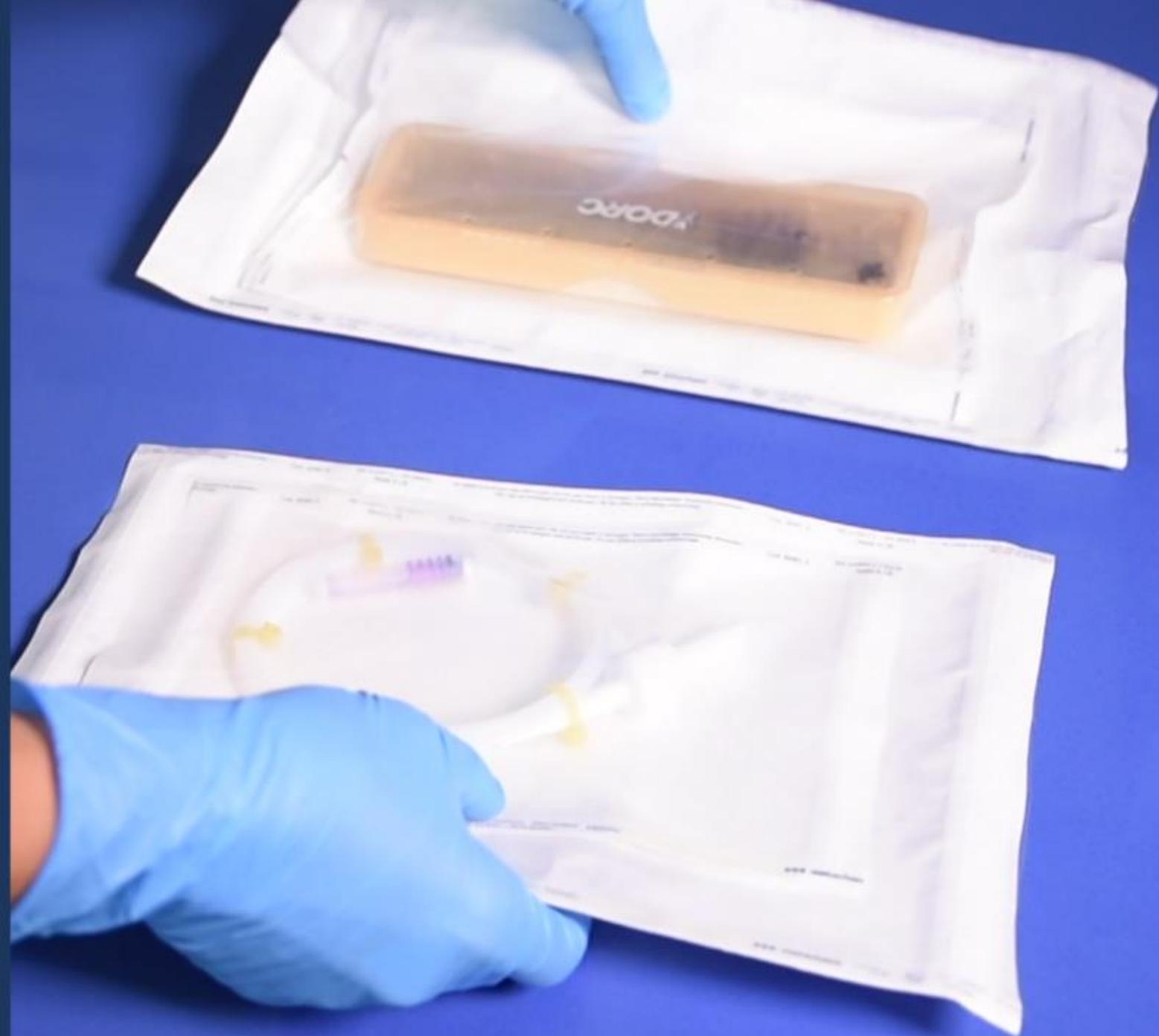

4

Freigabe der Beladung


4.4 ÜBERPRÜFUNG DER INDIKATOREN

- Überprüfung Indikator-Band.
- Überprüfung Indikator-Beutel.
- Überprüfen des Indikators innerhalb der Beutel.
- Überprüfung, dass BI verarbeitet wurde.
- Überprüfen der Luftabsaugung mittels Helix-Indikator.

VERARBEITET



UNVERARBEITET

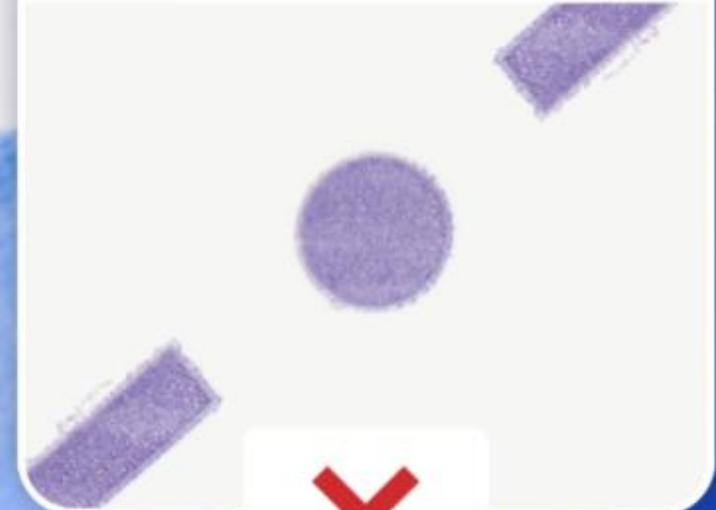

4

Freigabe der Beladung


4.4 ÜBERPRÜFUNG DER INDIKATOREN

- Überprüfung Indikator-Band.
- Überprüfung Indikator-Beutel.
- Überprüfen des Indikators innerhalb der Beutel.
- Überprüfung, dass BI verarbeitet wurde.
- Überprüfen der Luftabsaugung mittels Helix-Indikator.

VERARBEITET



UNVERARBEITET

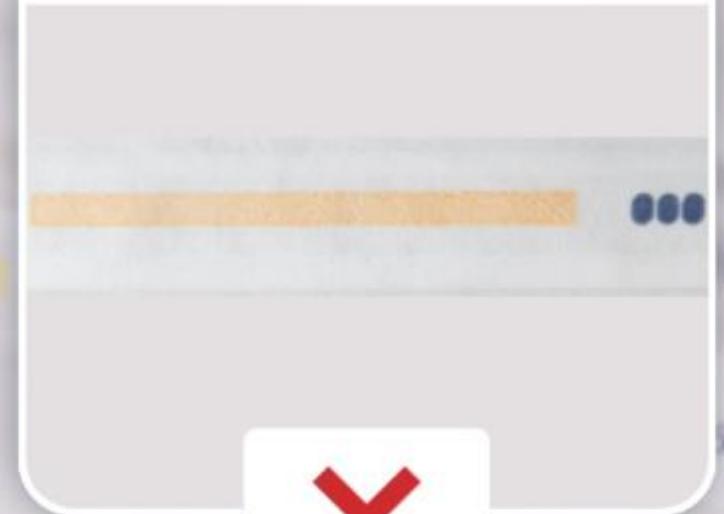


4


Freigabe der Beladung

4.4 ÜBERPRÜFUNG DER INDIKATOREN


- Überprüfung Indikator-Band.
- Überprüfung Indikator-Beutel.
- Überprüfen des Indikators innerhalb der Beutel.
- Überprüfung, dass BI verarbeitet wurde.
- Überprüfen der Luftabsaugung mittels Helix-Indikator.

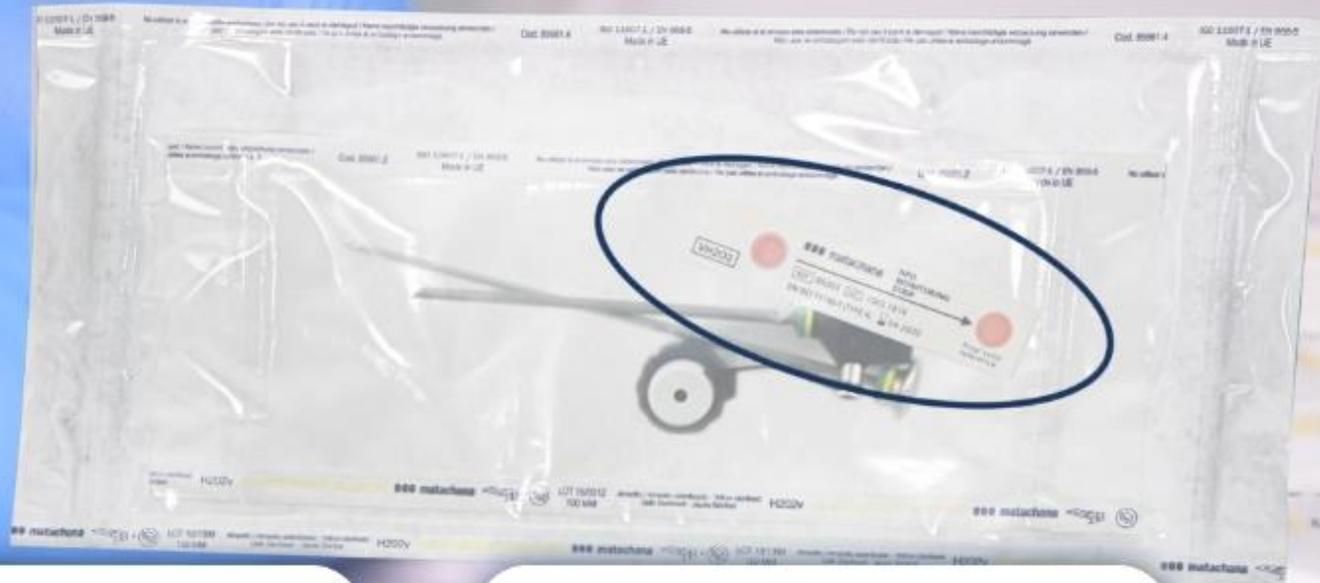

VERARBEITET

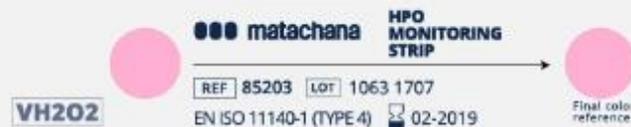

UNVERARBEITET

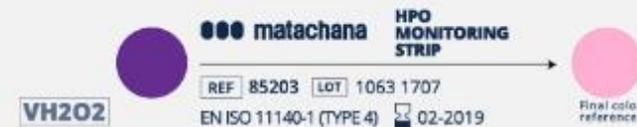

4

Freigabe der Beladung

4.4 ÜBERPRÜFUNG DER INDIKATOREN

- Überprüfung Indikator-Band.
- Überprüfung Indikator-Beutel.
- Überprüfen des Indikators innerhalb der Beutel.
- Überprüfung, dass BI verarbeitet wurde.
- Überprüfen der Luftabsaugung mittels Helix-Indikator.



FOLGEN SIE BITTE DEM INTUBATIONSVERFAHREN GEMÄß DEN ANLEITUNGEN VON MATACHANA.

VERARBEITET



UNVERARBEITET






4

Freigabe der Beladung

4.4 ÜBERPRÜFUNG DER INDIKATOREN

- Überprüfung Indikator-Band.
- Überprüfung Indikator-Beutel.
- Überprüfen des Indikators innerhalb der Beutel.
- Überprüfung, dass BI verarbeitet wurde.
- Überprüfen der Luftabsaugung mittels Helix-Indikator.

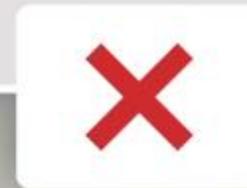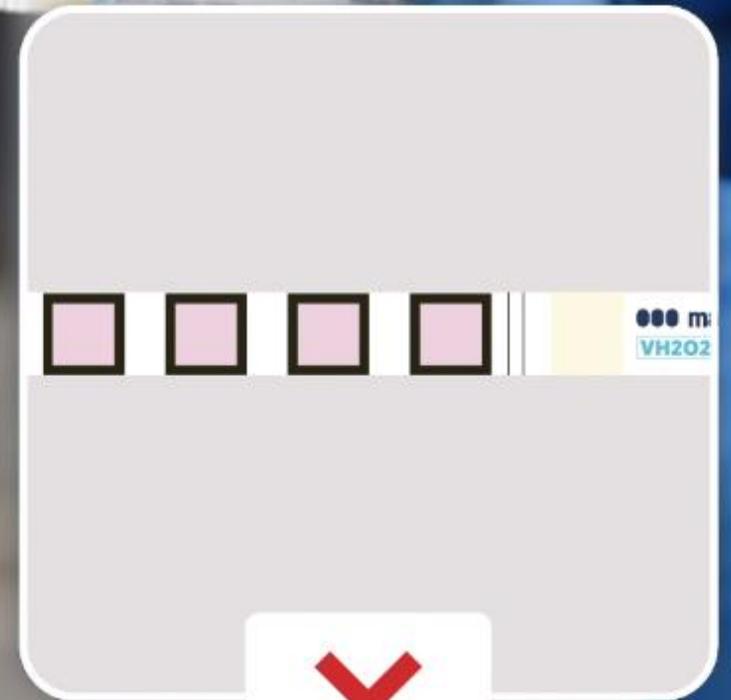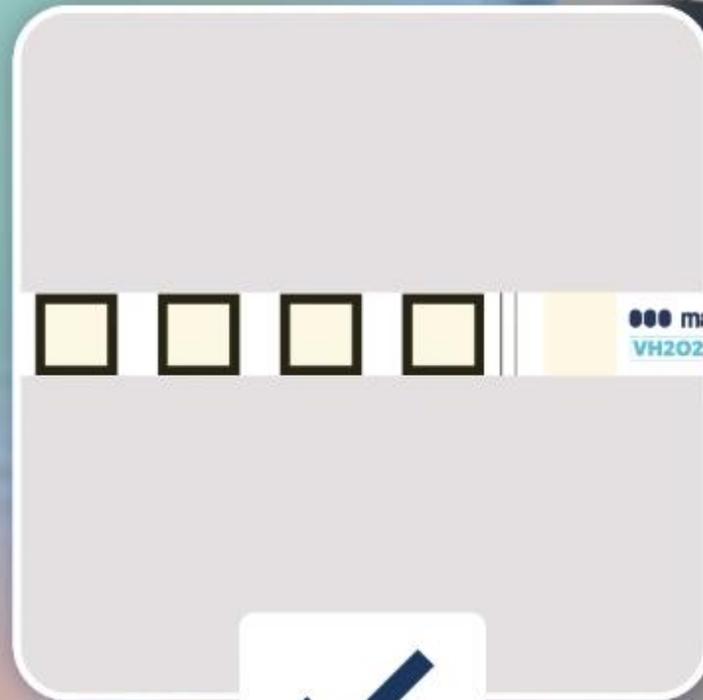

© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

URHEBERRECHT

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokuments ist geistiges Eigentum von Antonio Matachana, S.A. Die gesamte oder teilweise Reproduktion der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, sowie deren Übersetzung, Kopie oder Manipulierung mit jedem Mittel und auf jedem Datenträger, sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte strikt verboten.

Die nicht erlaubte Benutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, sowie die Verletzung der geistigen oder industriellen Urheberrechte von Antonio Matachana, S.A., haben die gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen zur Folge.

INHALT

Dies ist ein Werbevideo. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Anlagen, kann sich der Inhalt dieser Dokumentation verändern.