

ЭТАПЫ

ОБРАБОТКИ

4

Выгрузка
изделий





4

Выгрузка
изделий4.1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ВЫПУСКА

Убедитесь, что цикл был выполнен корректно без ошибок и предупреждений.

- На дисплее нет ошибок или предупреждений.
- В отчете нет ошибок или предупреждений.

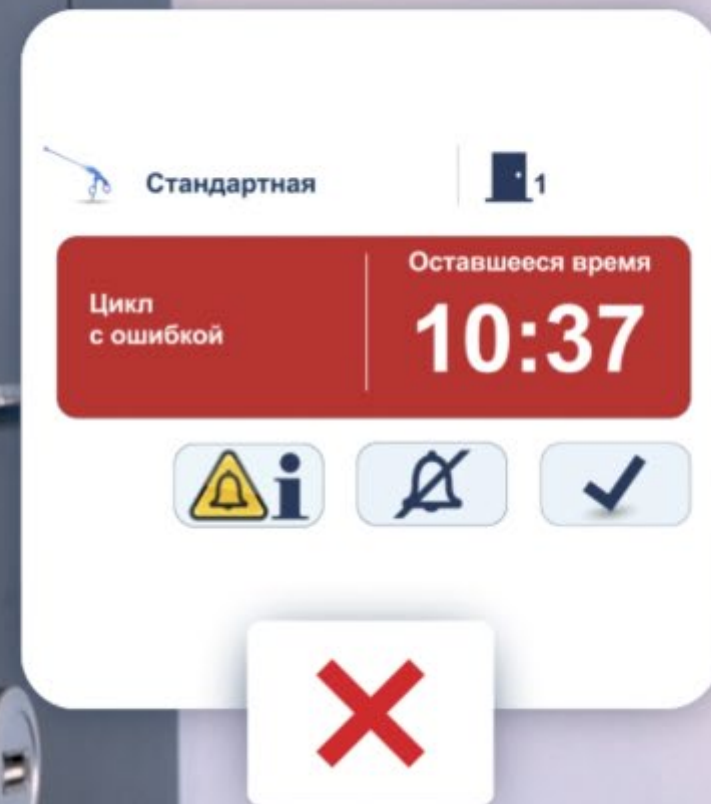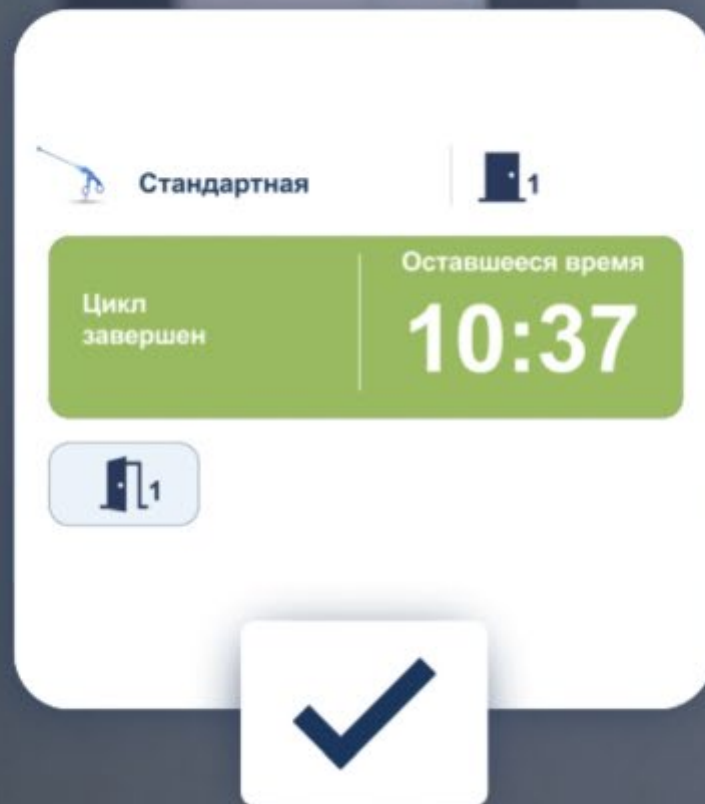

4

Выгрузка
изделий4.1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ВЫПУСКА

Убедитесь, что цикл был выполнен корректно без ошибок и предупреждений.

- На дисплее нет ошибок или предупреждений.
- В отчете нет ошибок или предупреждений.

Start: 08-01-2020 09:55:01
 Cycle duration: 00:40:24
 Ster. Duration: 00:24:24

БЕЗ ОШИБОК

00:00:00 T 55.5°C P 1028.0hPa
 00:40:25 T 55.6°C P 1027.8hPa
 CYCLE END



Start: 09-01-2020 15:55:12
 Cycle duration: 00:17:23
 Ster. Duration: 00:06:19

С ОШИБКАМИ

00:00:00 T 54.2°C P 1023.1hPa
 CYCLE END
 00:24:15 T 55.6°C P 1021.8hPa
 W48 Cycle with fault




4

Выгрузка изделий

4.2 ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

- Нажмите на иконку двери для ее разблокировки.
- Дверь разблокируется автоматически.
- Откройте дверь. Обязательно используйте перчатки!

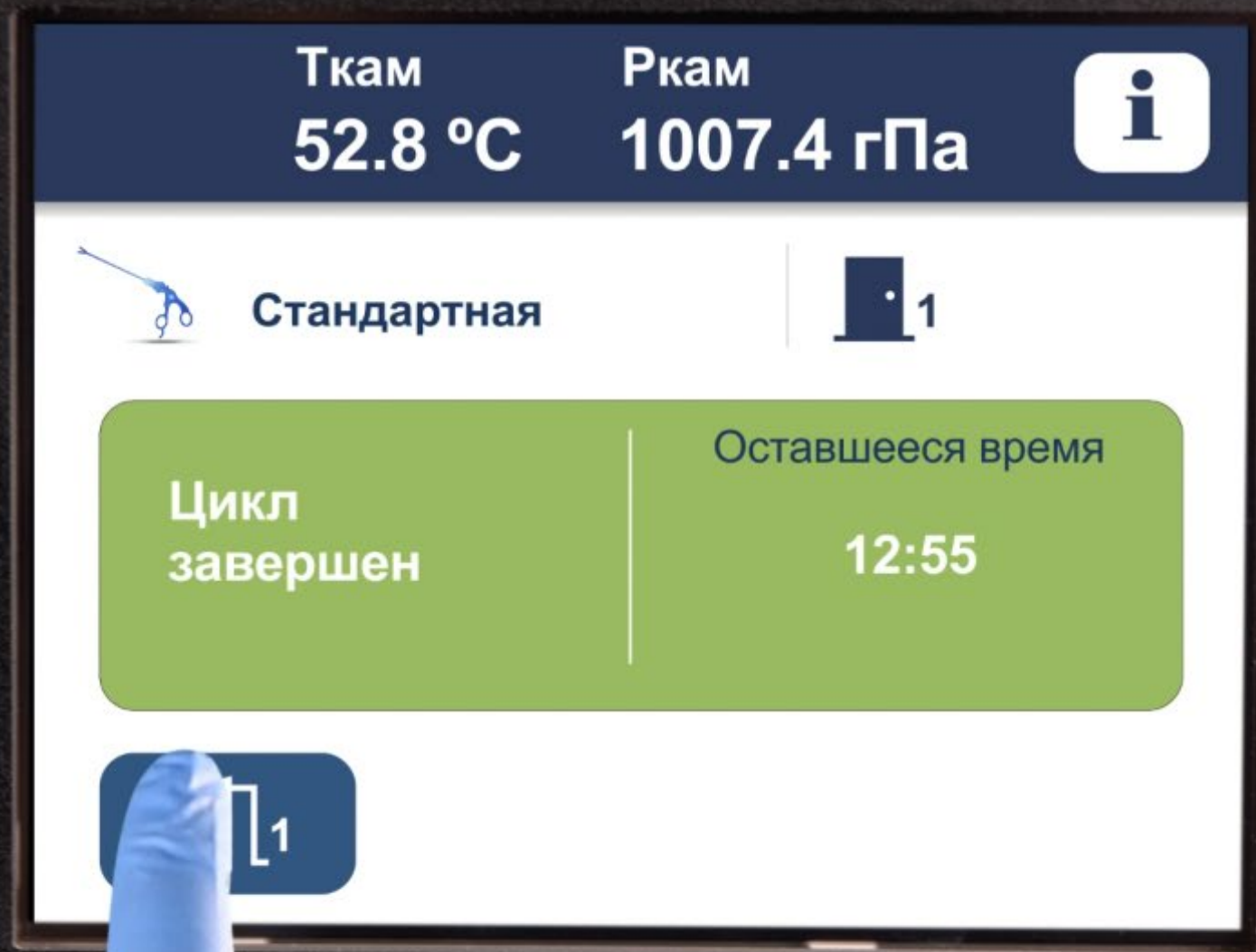

4

Выгрузка изделий

4.2 ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

- Нажмите на иконку двери для ее разблокировки.
- Дверь разблокируется автоматически.
- Откройте дверь.
Обязательно используйте перчатки!

4

Выгрузка изделий

4.2 ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

- Нажмите на иконку двери для ее разблокировки.
- Дверь разблокируется автоматически.
- Откройте дверь. Обязательно используйте перчатки!



4

Выгрузка изделий

4.3 ВЫГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМЕРЫ

- Для удобства выкатите полку из камеры.
- Разместите обработанные изделия на столе для проверки.




4

Выгрузка изделий

4.3 ВЫГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМЕРЫ

- Для удобства выкатите полку из камеры.
- Разместите обработанные изделия на столе для проверки.

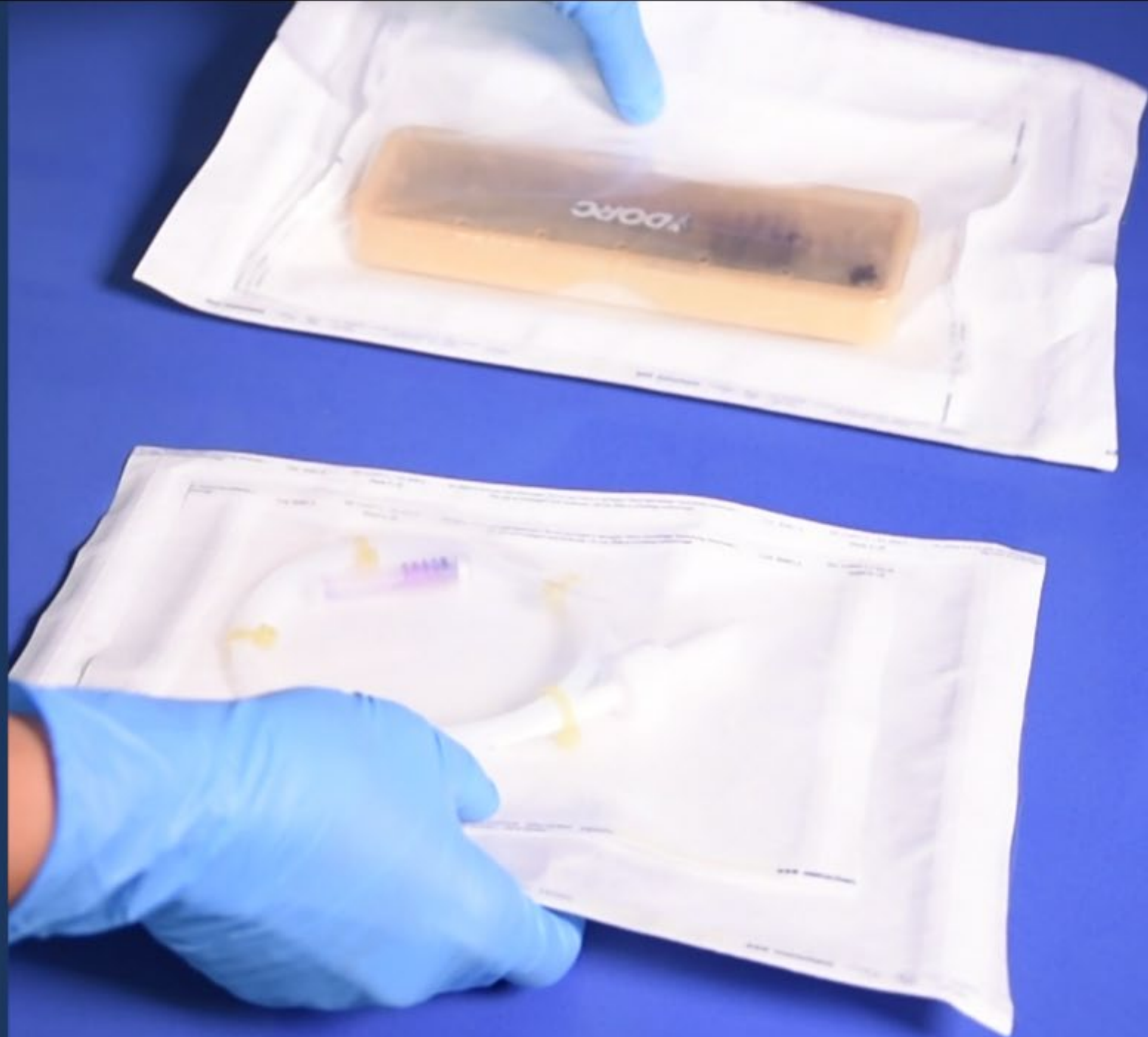

4

Выгрузка изделий


4.4 ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ

- Проверьте, что сработал индикатор на ленте.
- Проверьте, что сработали индикаторы на пакетах.
- Проверьте, что сработали индикаторы внутри пакетов.
- Проверьте результат биологического индикатора.
- С помощью Helix теста проверьте, что из камеры воздух был полностью откачен.

СРАБОТАЛ



НЕ СРАБОТАЛ

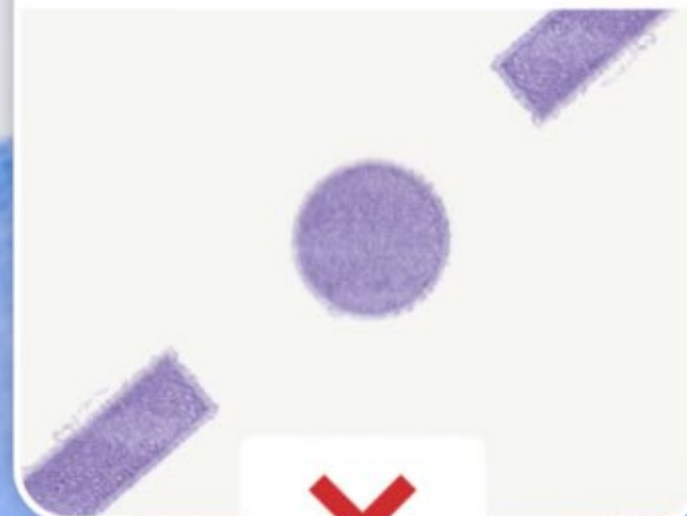

4

Выгрузка изделий

4.4 ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ

- Проверьте, что сработал индикатор на ленте.
- Проверьте, что сработали индикаторы на пакетах.
- Проверьте, что сработали индикаторы внутри пакетов.
- Проверьте результат биологического индикатора.
- С помощью Helix теста проверьте, что из камеры воздух был полностью откачен.

СРАБОТАЛ




НЕ СРАБОТАЛ




4

Выгрузка
изделий4.4 ПРОВЕРКА
ИНДИКАТОРОВ


- Проверьте, что сработал индикатор на ленте.
- Проверьте, что сработали индикаторы на пакетах.
- Проверьте, что сработали индикаторы внутри пакетов.
- Проверьте результат биологического индикатора.
- С помощью Helix теста проверьте, что из камеры воздух был полностью откачен.

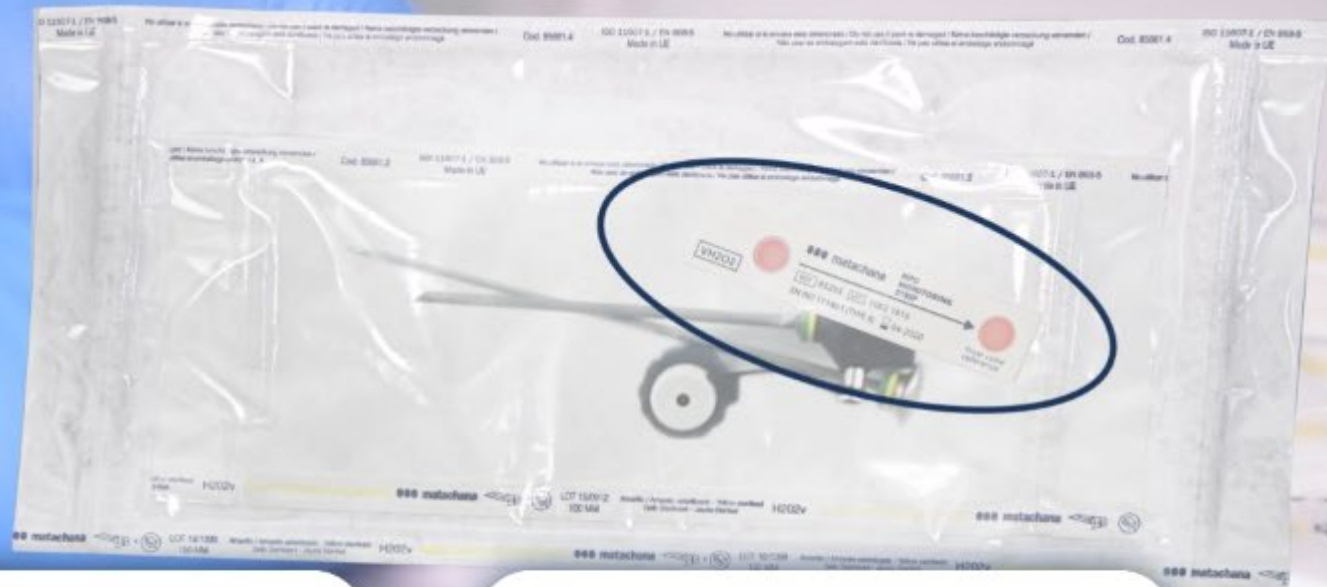

СРАБОТАЛ

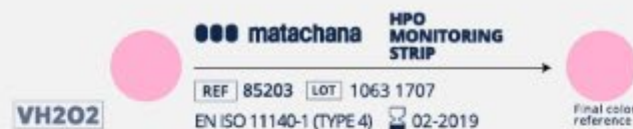

НЕ СРАБОТАЛ

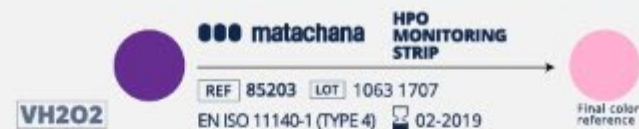

4

Выгрузка
изделий4.4 ПРОВЕРКА
ИНДИКАТОРОВ

- Проверьте, что сработал индикатор на ленте.
- Проверьте, что сработали индикаторы на пакетах.
- Проверьте, что сработали индикаторы внутри пакетов.
- Проверьте результат биологического индикатора.
- С помощью Helix теста проверьте, что из камеры воздух был полностью откачен.




ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО
ИНКУБИРОВАНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИНДИКАТОРОВ

СРАБОТАЛ**НЕ СРАБОТАЛ**

4

Выгрузка
изделий4.4 ПРОВЕРКА
ИНДИКАТОРОВ

- Проверьте, что сработал индикатор на ленте.
- Проверьте, что сработали индикаторы на пакетах.
- Проверьте, что сработали индикаторы внутри пакетов.
- Проверьте результат биологического индикатора.
- С помощью Helix теста проверьте, что из камеры воздух был полностью откачен.

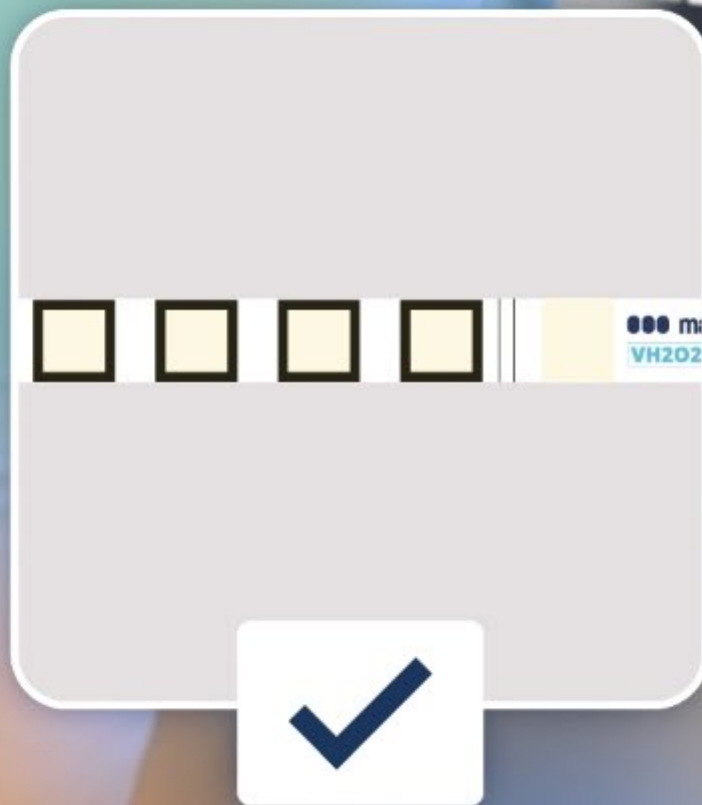

© ANTONIO MATACHANA, S.A. 2021

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Все права защищены. Компания **Antonio Matachana, S.A.** оставляет за собой право интеллектуальной собственности на данные материалы. Запрещено использование и копирование какой-либо части без разрешения законного представителя, в том числе перевод, воспроизведение и изменение использованием любых средств или поддержки. Незаконное использование информации, содержащейся в документе, а так же нарушение промышленной и интеллектуальной собственности компании **Antonio Matachana, S.A.** влечет за собой преследование согласно действующего законодательства.

СОДЕРЖАНИЕ

Это рекламное видео. Ввиду постоянного совершенствования нашего оборудования, содержимое данного видео может меняться.