

# BLUKAT® - AUSTAUSCH





## BluKat®- Austausch

### 1. ÜBERPRÜFUNG DER BLUKAT®-FÜLLMENGE

- Überprüfen Sie die LED-Farbe, um das Niveau der Sterilisierlösung zu ermitteln.
- Tippen Sie auf das BluKat®-Symbol, um Informationen zum Stand der Sterilisierlösung zu erhalten.



# 130HPO®



# 18 Zyklen

# 50HPO®



# 30 Zyklen



130HPO<sup>®</sup>



5  
Zyklen

50HPO<sup>®</sup>



8  
Zyklen



130HPO<sup>®</sup>



2  
Zyklen

50HPO<sup>®</sup>



2  
Zyklen



BluKat®-  
Austausch

TK  
52.8 °C

PK  
1007.4 hPa



1. ÜBERPRÜFUNG DER  
BLUKAT®-FÜLLMENGE

- Überprüfen Sie die LED-Farbe, um das Niveau der Sterilisierlösung zu ermitteln.
- Tippen Sie auf das BluKat®-Symbol, um Informationen zum Stand der Sterilisierlösung zu erhalten.


BluKat:




30 zyklen



Rapid

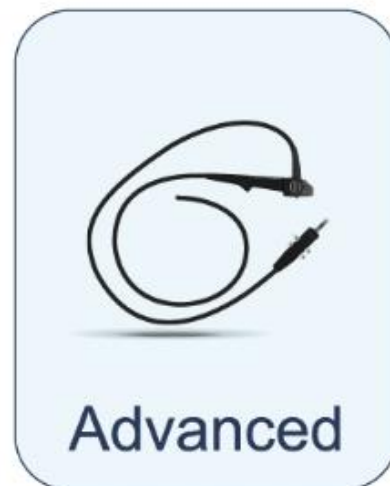

Advanced

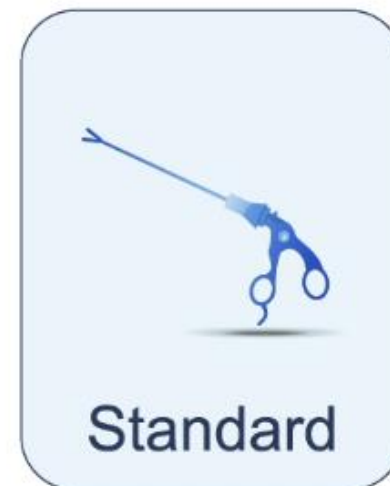

Standard





## BluKat®- Austausch



TK  
52.8 °C

PK  
1007.4 hPa



### 1. ÜBERPRÜFUNG DER BLUKAT®-FÜLLMENGE

- BluKat® Chargen-Nr. und Verfallsdatum.
- Verbleibende Anzahl von Zyklen.
- Verbleibende Tage bis zum Verfall.

## BluKat




Chargen-Nr.:

18001

Verfallsdatum:

07-2021

Verbleibende Zyklen: 30    Haltbarkeit: 30 Tage

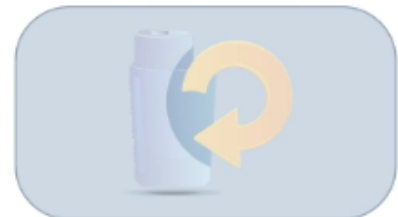



**BluKat®-  
Austausch**



TK  
52.8 °C

PK  
1007.4 hPa



## 1. ÜBERPRÜFUNG DER BLUKAT®-FÜLLMENGE

- BluKat® Chargen-Nr. und Verfallsdatum.
- Verbleibende Anzahl von Zyklen.
- Verbleibende Tage bis zum Verfall.

## BluKat



Chargen-Nr.: 18001  
Verfallsdatum: 07-2021  
Verbleibende Zyklen: 30    Haltbarkeit: 30 Tage





**BluKat®-**  
**Austausch**



TK  
52.8 °C

PK  
1007.4 hPa



## 1. ÜBERPRÜFUNG DER BLUKAT®-FÜLLMENGE

- BluKat® Chargen-Nr. und Verfallsdatum.
- Verbleibende Anzahl von Zyklen.
- Verbleibende Tage bis zum Verfall.

## BluKat



Chargen-Nr.:

18001

Verfallsdatum:

07-2021

Verbleibende Zyklen: 30    Haltbarkeit: 30 Tage





## BluKat®- Austausch

### 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Der Sterilisator zeigt an, sobald keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht oder wenn diese abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Taste Zyklus entleeren.
- Drücken Sie die Play-Taste.

Wenn keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht.



TK	PK
52.8 °C	1007.4 hPa

 VORGANG GESTOPPT

**E21 Sterilisierlösung  
aufgebraucht – BluKat**





## BluKat®- Austausch

### 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Der Sterilisator zeigt an, sobald keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht oder wenn diese abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Taste Zyklus entleeren.
- Drücken Sie die Play-Taste.

Wenn die Sterilisierlösung abgelaufen ist.




TK	PK
52.8 °C	1007.4 hPa

 VORGANG GESTOPPT

**E20 BluKat abgelaufen**



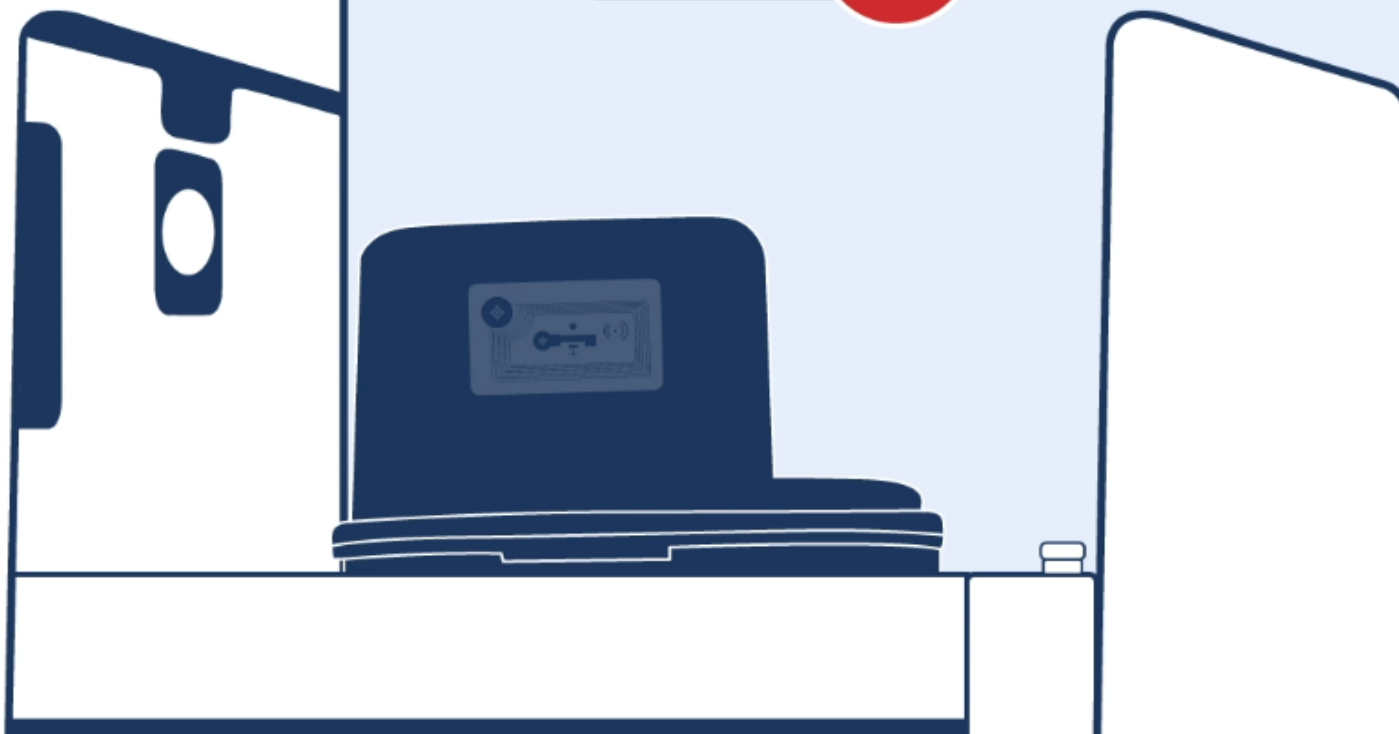


## BluKat®- Austausch

### 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Der Sterilisator zeigt an, sobald keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht oder wenn diese abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Taste Zyklus entleeren.
- Drücken Sie die Play-Taste.

Wenn der BluKat®-Behälter ausgetauscht werden muss.

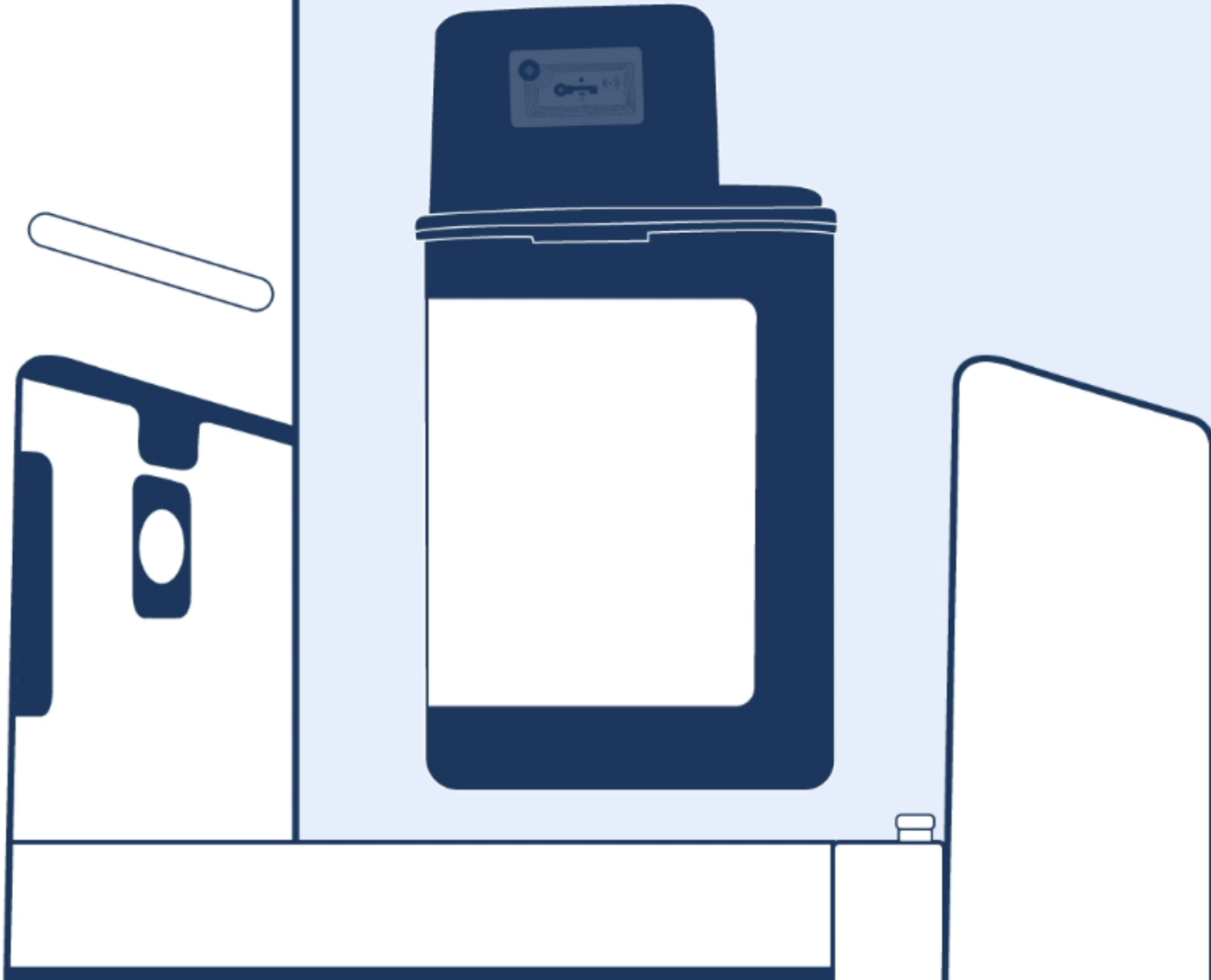



## BluKat®- Austausch

### 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Der Sterilisator zeigt an, sobald keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht oder wenn diese abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Taste Zyklus entleeren.
- Drücken Sie die Play-Taste.

HPO

TK 52.8 °C PK 1007.4 hPa

BluKat 0 zyklen

Rapid Advanced Standard



BluKat®-  
Austausch



TK  
52.8 °C

PK  
1007.4 hPa



## 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Der Sterilisator zeigt an, sobald keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht oder wenn diese abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Taste Zyklus entleeren.
- Drücken Sie die Play-Taste.

### BluKat




Chargen-Nr.:

18001

Verfallsdatum:

07-2021

Verbleibende Zyklen: 0    Haltbarkeit: 8 Tage

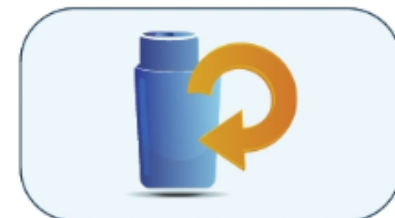



**BluKat®-**  
**Austausch**



**TK**  
**52.8 °C**

**PK**  
**1007.4 hPa**



## 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Der Sterilisator zeigt an, sobald keine Sterilisierlösung mehr zur Verfügung steht oder wenn diese abgelaufen ist.
- Drücken Sie die Taste Zyklus entleeren.
- Drücken Sie die Play-Taste.



**BluKat-**  
**Entsorgung**



Verbleibende Zeit

**00:33**





BluKat®-  
Austausch

## 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Bestätigung des BluKat®-Entleerungszyklus.
- Die Gesamtzeit hängt von der Menge der verbliebenen Sterilisierlösung ab.

TK  
52.8 °C

PK  
1007.4 hPa



Dies ist ein **TESTPROGRAMM** -  
das Material wird nicht steril sein!  
Diesen Test durchführen?





**BluKat®-  
Austausch**



**TK  
52.8 °C**

**PK  
1007.4 hPa**



## 2. DURCHFÜHREN DES ENTLEERUNGSZYKLUS

- Bestätigung des BluKat®-Entleerungszyklus.
- Die Gesamtzeit hängt von der Menge der verbliebenen Sterilisierlösung ab.



**BluKat-  
Entsorgung**



**LAUFENDER  
PROZESS**

Verbleibende Zeit

**00:25**





## BluKat®- Austausch

### 3. ENTNAHME DES BLUKAT® AUS DEM STERILISATOR.

- Achten Sie darauf,  
Handschuhe zu tragen.
- Bestätigen Sie das Ende  
der Entleerung durch  
Drücken des Symbols.







**BluKat®-  
Austausch**



**TK  
52.8 °C**

**PK  
1007.4 hPa**



**3. ENTNAHME DES BLUKAT®  
AUS DEM STERILISATOR.**

- Achten Sie darauf,  
Handschuhe zu tragen.
- Bestätigen Sie das Ende  
der Entleerung durch  
Drücken des Symbols.



**BluKat-  
Entsorgung**



**Abgeschlossen**

**BluKat  
austauschen!**





## BluKat®- Austausch

### 3. ENTNAHME DES BLUKAT® AUS DEM STERILISATOR.

- Ziehen Sie die Tür heraus, um Zugang zum BluKat-Behälter zu bekommen.
- Ziehen Sie den Behälter heraus.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung entleerter Behälter dieser Art.





## BluKat®- Austausch

### 3. ENTNAHME DES BLUKAT® AUS DEM STERILISATOR.

- Ziehen Sie die Tür heraus, um Zugang zum BluKat-Behälter zu bekommen.
- Ziehen Sie den Behälter heraus.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung entleerter Behälter dieser Art.





## BluKat®- Austausch

### 3. ENTNAHME DES BLUKAT® AUS DEM STERILISATOR.

- Ziehen Sie die Tür heraus, um Zugang zum BluKat-Behälter zu bekommen.
- Ziehen Sie den Behälter heraus.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung entleerter Behälter dieser Art.





## BluKat®- Austausch

### 4. NEUES BLUKAT® AUS DER VERPACKUNG ENTNEHMEN

- Öffnen Sie die Verpackung und folgen Sie den Anweisungen.



●●● matachana






## BluKat®- Austausch

### 4. NEUES BLUKAT® AUS DER VERPACKUNG ENTNEHMEN

- Öffnen Sie die Verpackung und folgen Sie den Anweisungen.

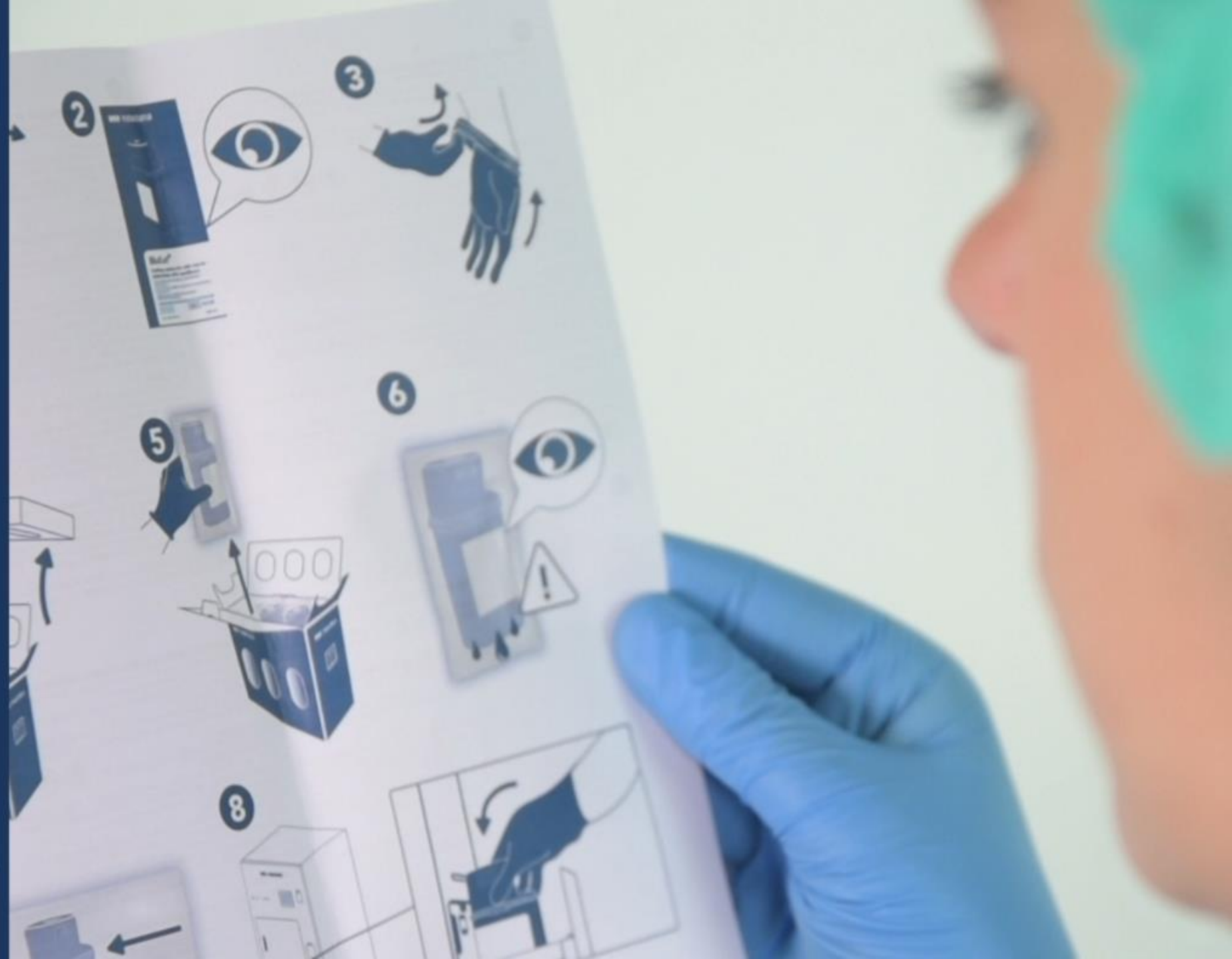



## BluKat®- Austausch

### 4. NEUES BLUKAT® AUS DER VERPACKUNG ENTNEHMEN

- Öffnen Sie die Verpackung und folgen Sie den Anweisungen.



●●● matachana





## BluKat®- Austausch

### 4. NEUES BLUKAT® AUS DER VERPACKUNG ENTNEHMEN

- Öffnen Sie die Verpackung und folgen Sie den Anweisungen.



●●● matachana







## BluKat®- Austausch

### 4. NEUES BLUKAT® AUS DER VERPACKUNG ENTNEHMEN

- Öffnen Sie die Verpackung und folgen Sie den Anweisungen.





**BluKat®-**  
**Austausch**



**TK**  
**52.8 °C**

**PK**  
**1007.4 hPa**



5. EINSETZEN EINES NEUEN  
BLUKAT® IN DEN STERILISATOR

- Drücken Sie auf das Symbol , um das BluKat®-Fach zu entriegeln.
- Achten Sie darauf, Handschuhe zu tragen.
- Setzen Sie das BluKat in sein Fach ein und achten Sie darauf, dass es in die richtige Position gebracht wurde.

**BluKat**



Chargen-Nr.:

Verfallsdatum:

Verbleibende Zyklen:      Haltbarkeit:      Tage





## BluKat®- Austausch

### 5. EINSETZEN EINES NEUEN BLUKAT® IN DEN STERILISATOR

- Drücken Sie auf das Symbol , um das BluKat®-Fach zu entriegeln.
- Achten Sie darauf, Handschuhe zu tragen.
- Setzen Sie das BluKat in sein Fach ein und achten Sie darauf, dass es in die richtige Position gebracht wurde.





## BluKat®- Austausch

### 5. EINSETZEN EINES NEUEN BLUKAT® IN DEN STERILISATOR

- Drücken Sie auf das Symbol , um das BluKat®-Fach zu entriegeln.
- Achten Sie darauf, Handschuhe zu tragen.
- Setzen Sie das BluKat in sein Fach ein und achten Sie darauf, dass es in die richtige Position gebracht wurde.





## BluKat®- Austausch

### 5. EINSETZEN EINES NEUEN BLUKAT® IN DEN STERILISATOR

- Zum Schließen drücken Sie das Fach wieder hinein.
- Der Sterilisator liest den RFID-Chip automatisch aus.
- Es werden neue BluKat®-Informationen angezeigt





## BluKat®- Austausch

### 5. EINSETZEN EINES NEUEN BLUKAT® IN DEN STERILISATOR

- Zum Schließen drücken Sie das Fach wieder hinein.
- Der Sterilisator liest den RFID-Chip automatisch aus.
- Es werden neue BluKat®-Informationen angezeigt





**BluKat®-  
Austausch**



**TK  
52.8 °C**

**PK  
1007.4 hPa**



**5. EINSETZEN EINES NEUEN  
BLUKAT® IN DEN STERILISATOR**

- Zum Schließen drücken Sie das Fach wieder hinein.
- Der Sterilisator liest den RFID-Chip automatisch aus.
- Es werden neue BluKat®-Informationen angezeigt

## BluKat



Chargen-Nr.:

18001

Verfallsdatum:

07-2021

Verbleibende Zyklen: 30    Haltbarkeit: 30 Tage



© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

## **URHEBERRECHT**

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokuments ist geistiges Eigentum von Antonio Matachana, S.A. Die gesamte oder teilweise Reproduktion der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, sowie deren Übersetzung, Kopie oder Manipulierung mit jedem Mittel und auf jedem Datenträger, sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte strikt verboten.

Die nicht erlaubte Benutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, sowie die Verletzung der geistigen oder industriellen Urheberrechte von Antonio Matachana, S.A., haben die gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen zur Folge.

## **INHALT**

Dies ist ein Werbevideo. Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Anlagen, kann sich der Inhalt dieser Dokumentation verändern.