

CAMBIO BLUKAT®





Cambio BluKat®



1. COMPROBAR EL NIVEL DEL BLUKAT®

- Verifique el color del Led para conocer el nivel de la solución esterilizante.
- Haga clic en el icono de BluKat® para conocer la situación del nivel de la solución esterilizante.

130HPO®



18
Ciclos

50HPO®



30
Ciclos



130HPO[®]



5
Ciclos

50HPO[®]



8
Ciclos



130HPO[®]



2
Ciclos

50HPO[®]



2
Ciclos



Cambio
BluKat®

Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



1. COMPROBAR EL NIVEL
DEL BLUKAT®

- Verifique el color del Led para conocer el nivel de la solución esterilizante.
- Haga clic en el icono de BluKat® para conocer la situación del nivel de la solución esterilizante.

BluKat:




30 ciclos



Rapid



Advanced

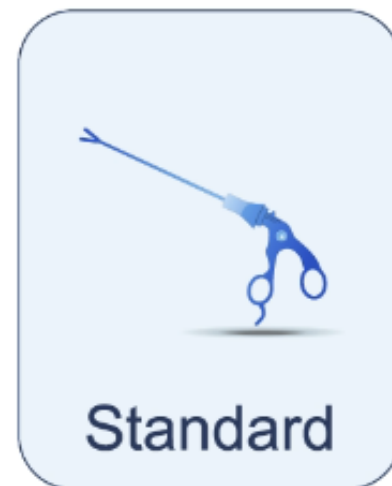

Standard





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



1. COMPROBAR EL NIVEL
DEL BLUKAT®

- Número de lote y fecha de caducidad del BluKat®.
- Número de ciclos restantes.
- Días restantes antes de la expiración.

BluKat



Número de lote:	18001
Fecha caducidad	07-2021
Quedan: 30 ciclos	Válido: 30 días





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa




1. COMPROBAR EL NIVEL
DEL BLUKAT®

- Número de lote y fecha de caducidad del BluKat®.
- Número de ciclos restantes.
- Días restantes antes de la expiración.

BluKat



Número de lote:	18001
Fecha caducidad	07-2021
Quedan: 30 ciclos	Válido: 30 días

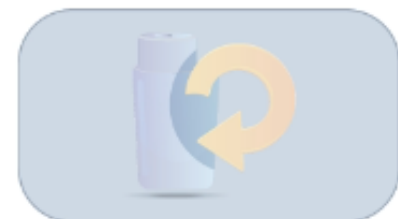



Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa




1. COMPROBAR EL NIVEL
DEL BLUKAT®

- Número de lote y fecha de caducidad del BluKat®.
- Número de ciclos restantes.
- Días restantes antes de la expiración.

BluKat



Número de lote:	18001
Fecha caducidad	07-2021
Quedan: 30 ciclos	Válido: 30 días

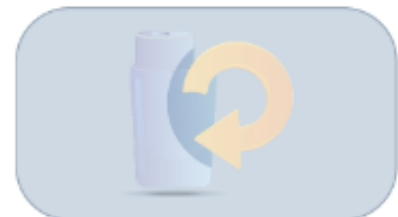



Cambio BluKat®

2. REALIZANDO EL CICLO DE VACIADO

- El esterilizador indicará cuando no hay más solución esterilizante o si está caducada.
- Pulse el botón del ciclo de vaciado.
- Pulse el botón "play".

Cuando no hay más solución esterilizante disponible.



Tca	Pca
52.8 °C	1007.4 hPa

 PROCESO PARADO

E21 Solución esterilizante agotada. Reemplace BluKat



Cambio BluKat®

2. REALIZANDO EL CICLO DE VACIADO

- El esterilizador indicará cuando no hay más solución esterilizante o si está caducada.
- Pulse el botón del ciclo de vaciado.
- Pulse el botón "play".

Cuando la solución esterilizante ha caducado.



Tca	Pca
52.8 °C	1007.4 hPa

 PROCESO PARADO

E20 BluKat caducado



Cambio BluKat®

2. REALIZANDO EL CICLO DE VACIADO

- El esterilizador indicará cuando no hay más solución esterilizante o si está caducada.
- Pulse el botón del ciclo de vaciado.
- Pulse el botón "play".

Cuando el cartucho del BluKat® necesita ser cambiado.







Cambio BluKat®




2. REALIZANDO EL CICLO DE VACIADO




- El esterilizador indicará cuando no hay más solución esterilizante o si está caducada.
- Pulse el botón del ciclo de vaciado.
- Pulse el botón "play".

HPO

Tca 52.8 °C Pca 1007.4 hPa 

BluKat 0 ciclos 

 Rapid  Advanced  Standard



Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



2. REALIZANDO EL CICLO DE VACIADO

- El esterilizador indicará cuando no hay más solución esterilizante o si está caducada.
- Pulse el botón del ciclo de vaciado.
- Pulse el botón "play".

BluKat



Número de lote:

18001

Fecha caducidad:

07-2021

Quedan: **0 ciclos**

Válido: 8 días





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



2. REALIZANDO EL CICLO
DE VACIADO

- El esterilizador indicará cuando no hay más solución esterilizante o si está caducada.
- Pulse el botón del ciclo de vaciado.
- Pulse el botón "play".



Vaciado
BluKat



Tiempo restante

00:33





Cambio
BluKat®

2. REALIZANDO EL CICLO
DE VACIADO

- Confirme el ciclo de vaciado de BluKat®.
- El tiempo total dependerá de la cantidad de solución esterilizante restante.

Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



Este es un **PROGRAMA DE TEST**
¡El material no estará estéril!
¿Ejecutar este test?





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



2. REALIZANDO EL CICLO
DE VACIADO

- Confirme el ciclo de vaciado de BluKat®.
- El tiempo total dependerá de la cantidad de solución esterilizante restante.



Vaciado
BluKat



PROCESO
EN MARCHA

Tiempo restante

00:25





Cambio BluKat®

3. RETIRAR EL BLUKAT® DEL ESTERILIZADOR

- Utilice guantes.
- Confirme que el ciclo de vaciado ha terminado pulsando el icono.





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



3. RETIRAR EL BLUKAT®
DEL ESTERILIZADOR

- Utilice guantes.
- Confirme que el ciclo de vaciado ha terminado pulsando el icono.



Vaciado
BluKat



Completo

**¡Reemplace
BluKat!**





Cambio BluKat®

3. RETIRAR EL BLUKAT® DEL ESTERILIZADOR

- Abra la puerta para tener acceso al cartucho del BluKat®.
- Retire el cartucho.
- Observe las normas locales para desechar el cartucho vacío.





Cambio BluKat®

3. RETIRAR EL BLUKAT® DEL ESTERILIZADOR

- Abra la puerta para tener acceso al cartucho del BluKat®.
- Retire el cartucho.
- Observe las normas locales para desechar el cartucho vacío.






Cambio BluKat®

3. RETIRAR EL BLUKAT® DEL ESTERILIZADOR

- Abra la puerta para tener acceso al cartucho del BluKat®.
- Retire el cartucho.
- Observe las normas locales para desechar el cartucho vacío.

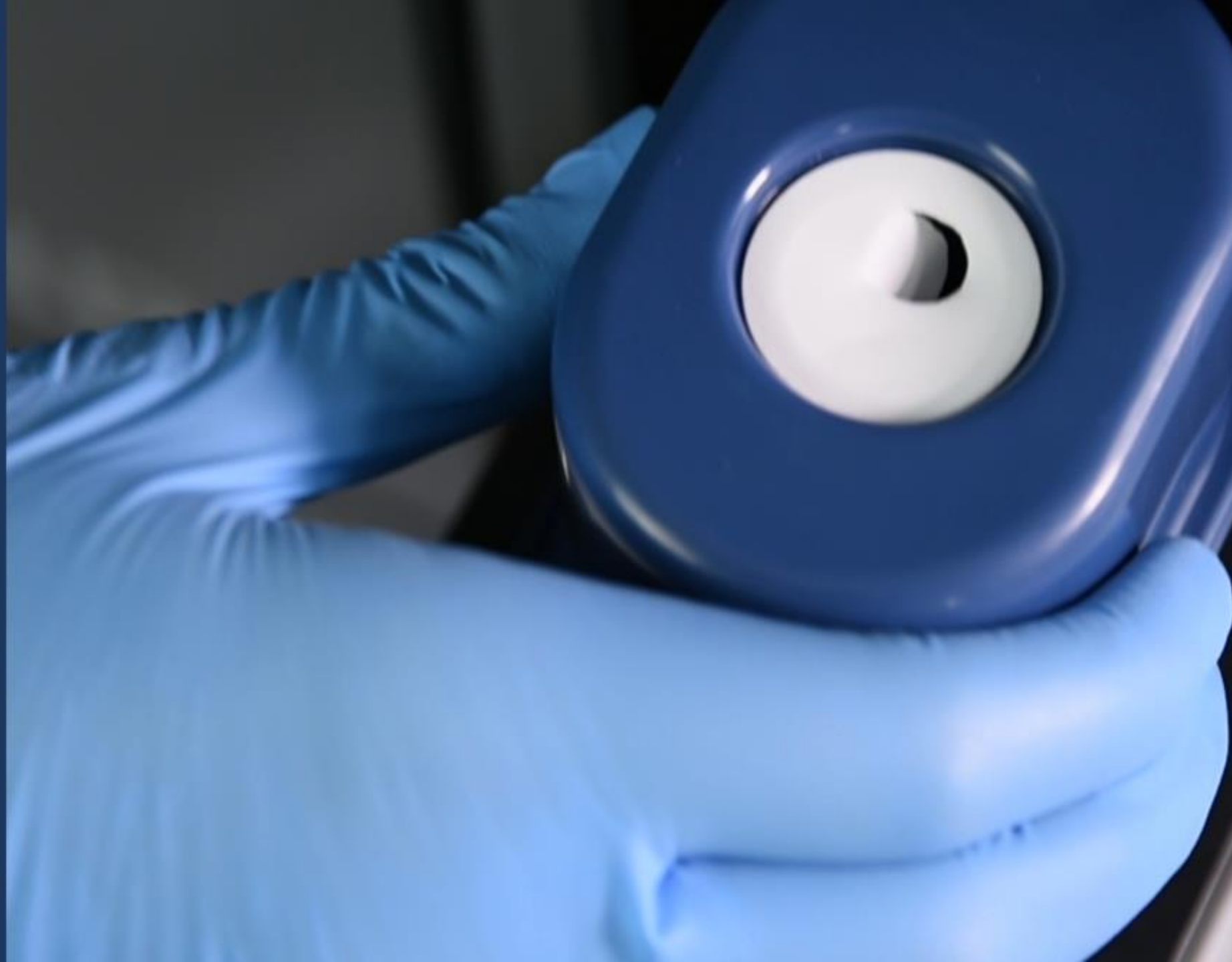



Cambio BluKat®

3. RETIRAR EL BLUKAT® DEL ESTERILIZADOR

- Abra la puerta para tener acceso al cartucho del BluKat®.
- Retire el cartucho.
- Observe las normas locales para desechar el cartucho vacío.






Cambio BluKat®

4. SACAR UN NUEVO BLUKAT® DE LA CAJA

- Abra la caja y siga las instrucciones.

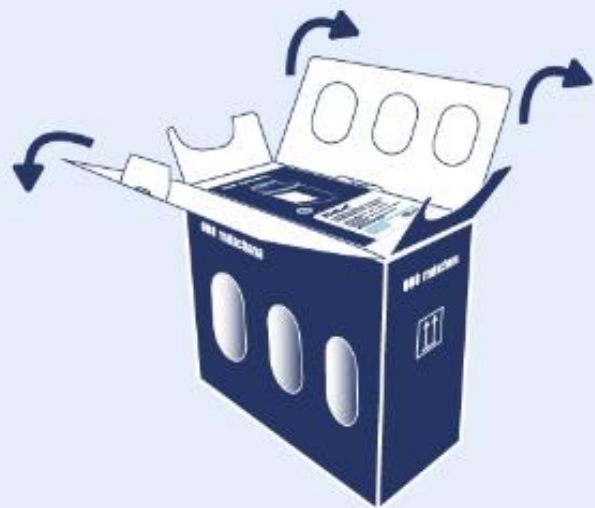

●●● matachana






Cambio BluKat®

4. SACAR UN NUEVO BLUKAT® DE LA CAJA

- Abra la caja y siga las instrucciones.

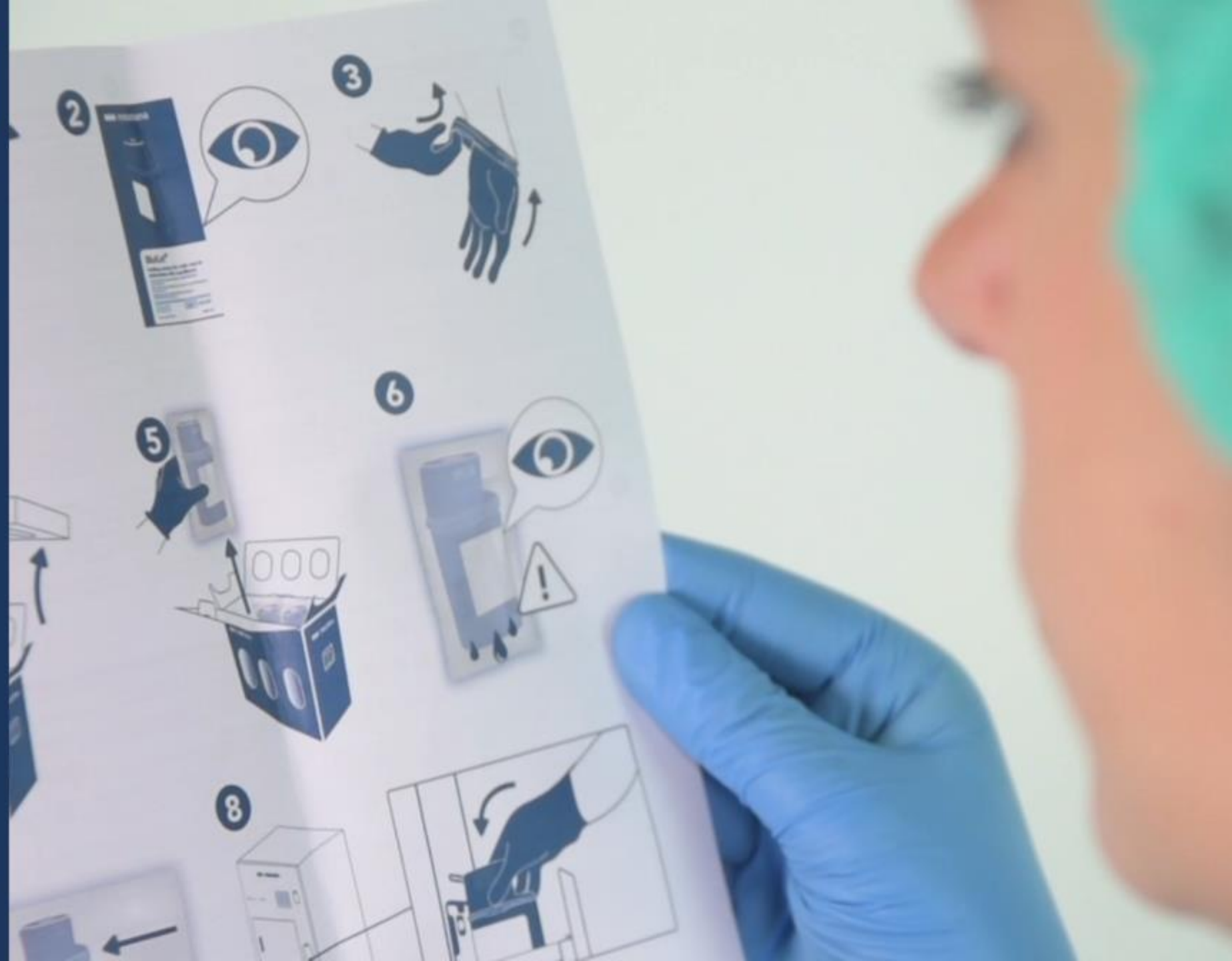



Cambio BluKat®

4. SACAR UN NUEVO BLUKAT® DE LA CAJA

- Abra la caja y siga las instrucciones.



●●● matachana





Cambio BluKat®

4. SACAR UN NUEVO BLUKAT® DE LA CAJA

- Abra la caja y siga las instrucciones.



●●● matachana





Cambio BluKat®

4. SACAR UN NUEVO BLUKAT® DE LA CAJA

- Abra la caja y siga las instrucciones.





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



5. COLOCAR UN NUEVO BLUKAT®
EN EL ESTERILIZADOR

- Pulse el icono para desbloquear el compartimento del BluKat®.
- Utilice guantes.
- Introduzca el BluKat® en su cajón, asegurándose de que está colocado en la posición correcta.

BluKat



Número de lote:

Fecha caducidad:

Quedan: ciclos

Válido: días





Cambio BluKat®

5. COLOCAR UN NUEVO BLUKAT® EN EL ESTERILIZADOR

- Pulse el icono para desbloquear el compartimento del BluKat®.
- Utilice guantes.
- Introduzca el BluKat® en su cajón, asegurándose de que está colocado en la posición correcta.





Cambio BluKat®

5. COLOCAR UN NUEVO BLUKAT® EN EL ESTERILIZADOR

- Pulse el icono para desbloquear el compartimento del BluKat®.
- Utilice guantes.
- Introduzca el BluKat® en su cajón, asegurándose de que está colocado en la posición correcta.

●●● matachana





Cambio BluKat®

5. COLOCAR UN NUEVO BLUKAT® EN EL ESTERILIZADOR

- Empuje el cajón para cerrarlo.
- El esterilizador leerá automáticamente la etiqueta RFID.
- Se mostrará la nueva información del BluKat®.





Cambio BluKat®

5. COLOCAR UN NUEVO BLUKAT® EN EL ESTERILIZADOR

- Empuje el cajón para cerrarlo.
- El esterilizador leerá automáticamente la etiqueta RFID.
- Se mostrará la nueva información del BluKat®.





Cambio
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



5. COLOCAR UN NUEVO BLUKAT®
EN EL ESTERILIZADOR

- Empuje el cajón para cerrarlo.
- El esterilizador leerá automáticamente la etiqueta RFID.
- Se mostrará la nueva información del BluKat®.

BluKat



Número de lote:	18001
Fecha caducidad:	07-2021
Quedan: 30 ciclos	Válido: 30 días



© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

COPYRIGHT

Reservados todos los derechos. Este contenido es propiedad intelectual de Antonio Matachana, S.A. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de la información incluida, así como su traducción, copia o manipulación, por cualquier medio o en cualquier tipo de soporte, sin la autorización expresa del titular de los derechos. La utilización no autorizada, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o Industrial de Antonio Matachana, S.A., dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

CONTENIDO

Este es un vídeo promocional. Debido a la constante evolución de nuestros equipos los contenidos incluidos pueden sufrir algún cambio.