

```
EXPRESS);  
HTTP) SERVER(APP);  
SOCKET.IO(HTTP);  
  
function (req, res) {  
  req - require('socket.io-client')(OTHER_HOST);  
  io.connect, function (client) {  
    client.on('data', function (data) {  
      console.log('client received: ' + data);  
      io.sockets.emit('message to clients', { data });  
      if (data.toString().endsWith('EXIT')) { client.destroy(); }  
    });  
  });  
}
```

```
CONSOLE.  
IO.SOCKETS.  
IF (DATA.TOSTRING().EN  
  );  
  AWAIT KNEK(AUTH).INSERT((USERNAM  
  );  
  // CONST  
  IF (USER  
  // COD  
  ) = AWAIT KNEK(AUTH).WHERE((SI
```

SUBSTITUIÇÃO DO DO BLUKAT®





Substituição do BluKat®

1. CHECANDO O NÍVEL DO BLUKAT®

- Verifique a Cor do Led para saber o nível da solução esterilizante.
- Clique no ícone do BluKat® para saber os detalhes do nível da solução esterilizante.



130HPO®



18
Ciclos

50HPO®



30
Ciclos



130HPO[®]



5
Ciclos

50HPO[®]



8
Ciclos



130HPO[®]



2
Ciclos

50HPO[®]



2
Ciclos



Substituição do BluKat®

1. CHECANDO O NÍVEL DO BLUKAT®

- Verifique a Cor do Led para saber o nível da solução esterilizante.
- Clique no ícone do Blukat® para saber os detalhes do nível da solução esterilizante.

Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa




BluKat:



30 ciclos



Rapid

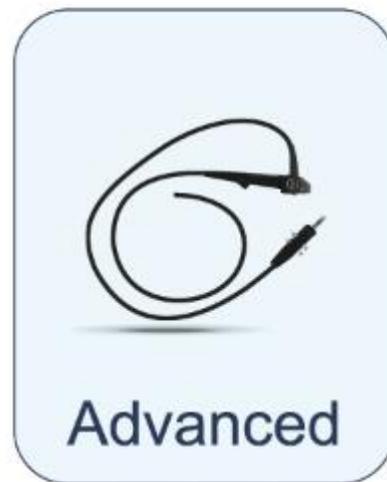

Advanced



Standard





Substituição do BluKat®

1. CHECANDO O NÍVEL DO BLUKAT®

- N° do lote do Blukat® e data de validade.
- N° restante de ciclos.
- Dias restantes até o vencimento.



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



BluKat



Número do lote: 18001
Data de validade: 07-2021
Restam: 30 ciclos Validade: 30 dias





Substituição do BluKat®

1. CHECANDO O NÍVEL DO BLUKAT®

- N° do lote do Blukat® e data de validade.
- N° restante de ciclos.
- Dias restantes até o vencimento.



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



BluKat



Número do lote: 18001
Data de validade: 07-2021
Restam: 30 ciclos Validade: 30 dias





Substituição do BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



1. CHECANDO O NÍVEL DO BLUKAT®

- N° do lote do Blukat® e data de validade.
- N° restante de ciclos.
- Dias restantes até o vencimento.

BluKat



Número do lote: 18001
Data de validade: 07-2021
Restam: 30 ciclos Validade: 30 dias






Substituição do BluKat®

2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- O esterilizador irá indicar quando não há mais solução esterilizante ou quando esta venceu.
- Pressione o botão do ciclo de esvaziamento.
- Pressione o botão de "início".

Quando não há mais solução esterilizante disponível

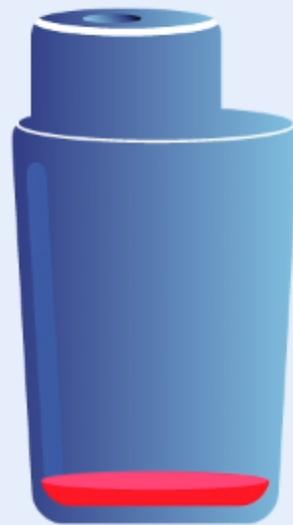

Tca	Pca
52.8 °C	1007.4 hPa

 PROCESSO INTERROMPIDO

E21 Solução esterilizante esgotada. Substitua o Blukat



Substituição do BluKat®

2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- O esterilizador irá indicar quando não há mais solução esterilizante ou quando esta venceu.
- Pressione o botão do ciclo de esvaziamento.
- Pressione o botão de "início".

Quando a solução esterilizante venceu.




Tca	Pca
52.8 °C	1007.4 hPa

 PROCESSO INTERROMPIDO

E20 Blukat vencido



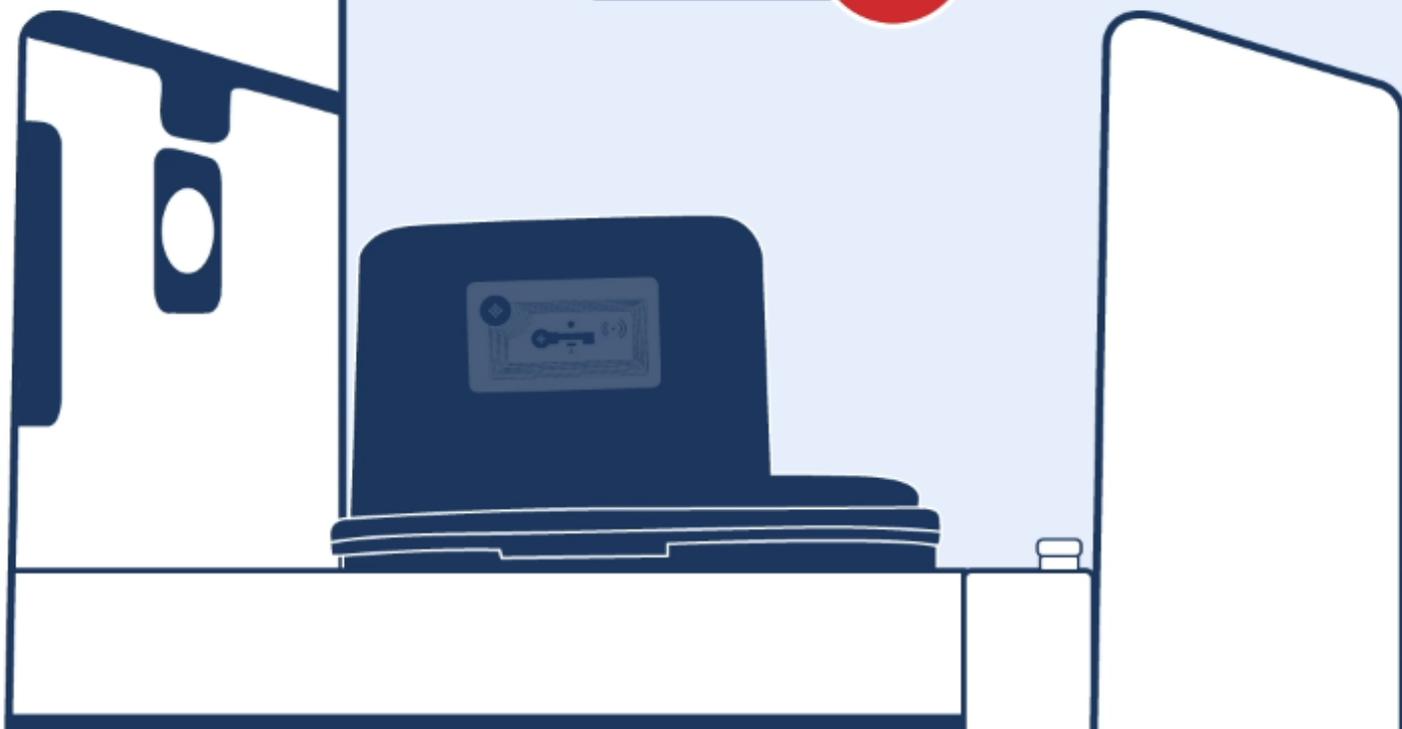


Substituição do BluKat®

2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- O esterilizador irá indicar quando não há mais solução esterilizante ou quando esta venceu.
- Pressione o botão do ciclo de esvaziamento.
- Pressione o botão de "início".

Quando o cartucho do BluKat precisa ser removido.

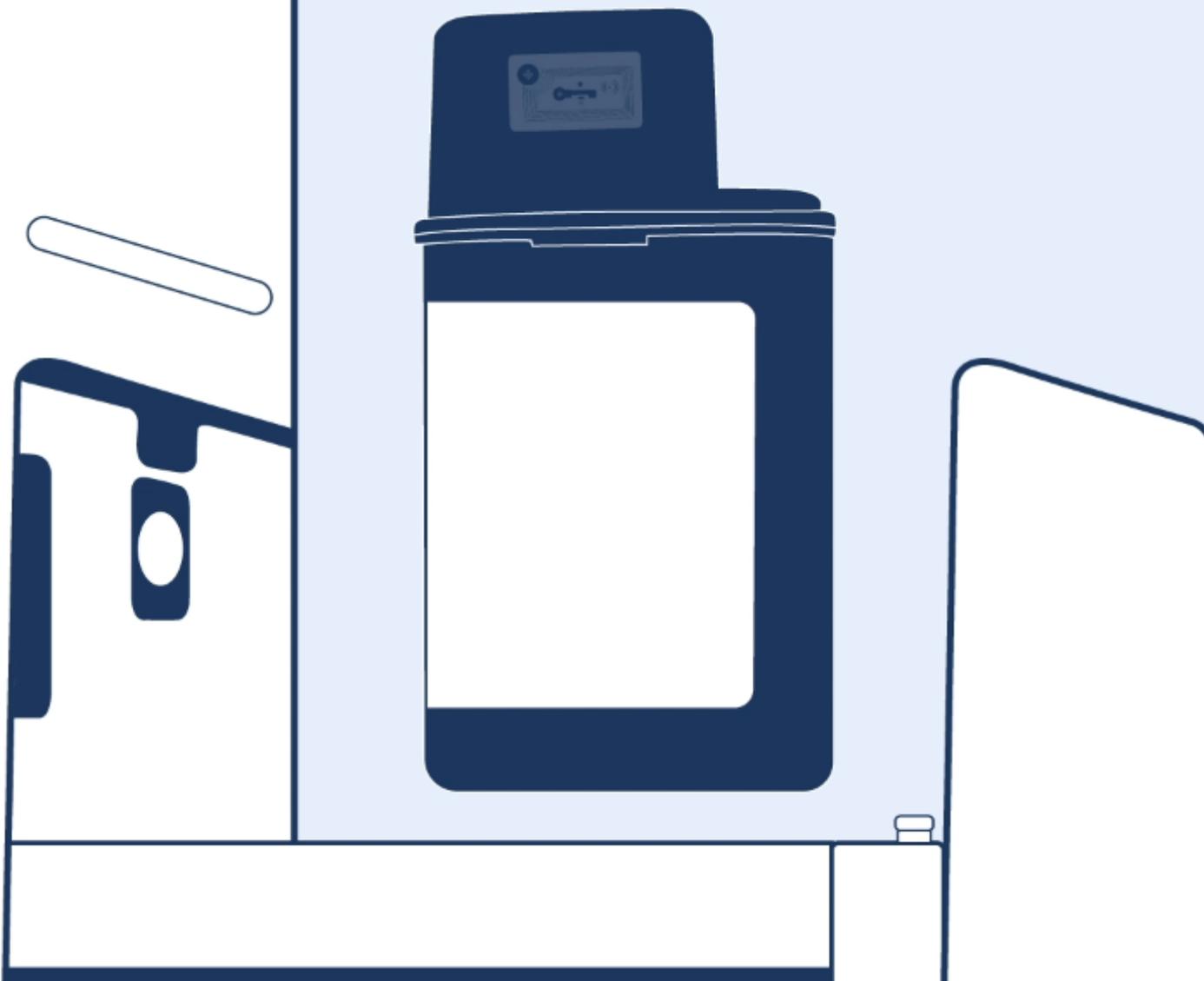



Substituição do BluKat®

2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- O esterilizador irá indicar quando não há mais solução esterilizante ou quando esta venceu.
- Pressione o botão do ciclo de esvaziamento.
- Pressione o botão de "início".

HPO

The screenshot shows the control panel of the HPO sterilizer. At the top, it displays 'Tca 52.8 °C' and 'Pca 1007.4 hPa' next to a power button icon. Below this, it shows 'BluKat' with a red progress bar and '0 ciclos' next to a door icon with '1'. The main area contains six buttons: 'Rapid' (with a syringe icon), 'Advanced' (with a coiled tube icon), 'Standard' (with a pair of forceps icon), a user icon, a printer icon, and a container icon.



Substituição do BluKat®

2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- O esterilizador irá indicar quando não há mais solução esterilizante ou quando esta venceu.
- Pressione o botão do ciclo de esvaziamento.
- Pressione o botão de "início".



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



BluKat



Número do lote:

18001

Data de validade:

07-2021

Restam: **0 ciclos**

Validade: 8 dias





Substituição do
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



Eliminação do
BluKat



2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- O esterilizador irá indicar quando não há mais solução esterilizante ou quando esta venceu.
- Pressione o botão do ciclo de esvaziamento.
- Pressione o botão de "início".

Tempo restante

00:33





Substituição do BluKat®

2. REALIZANDO O CICLO DE ESVAZIAMENTO

- Confirme o ciclo de esvaziamento do Blukat®.
- O tempo total dependerá da quantidade de solução esterilizante remanescente.

Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



Este é um **PROGRAMA TESTE**.
O material não será esterilizado!
Iniciar o teste?





Substituição do
BluKat®



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



2. REALIZANDO O CICLO
DE ESVAZIAMENTO

- Confirme o ciclo de esvaziamento do BluKat®.
- O tempo total dependerá da quantidade de solução esterilizante remanescente.



Eliminação do
BluKat



**PROCESSO
EM ANDAMENTO**

Tempo restante

00:25





Substituição do BluKat®

3. REMOVENDO O BLUKAT® DO ESTERILIZADOR

- Utilize luvas.
- Confirme a finalização do ciclo de esvaziamento pressionando o ícone.





Substituição do BluKat®

3. REMOVENDO O BLUKAT® DO ESTERILIZADOR

- Utilize luvas.
- Confirme a finalização do ciclo de esvaziamento pressionando o ícone.



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



Eliminação do
BluKat



Completo

**Substitua
o BluKat!**





Substituição do BluKat®

3. REMOVENDO O BLUKAT® DO ESTERILIZADOR

- Puxe a porta para acessar o cartucho do BluKat®.
- Retire o cartucho.
- Siga as recomendações locais para o descarte de cartuchos vazios.





Substituição do BluKat®

3. REMOVENDO O BLUKAT® DO ESTERILIZADOR

- Puxe a porta para acessar o cartucho do BluKat®.
- Retire o cartucho.
- Siga as recomendações locais para o descarte de cartuchos vazios.






Substituição do BluKat®

3. REMOVENDO O BLUKAT® DO ESTERILIZADOR

- Puxe a porta para acessar o cartucho do Blukat®.
- Retire o cartucho.
- Siga as recomendações locais para o descarte de cartuchos vazios.

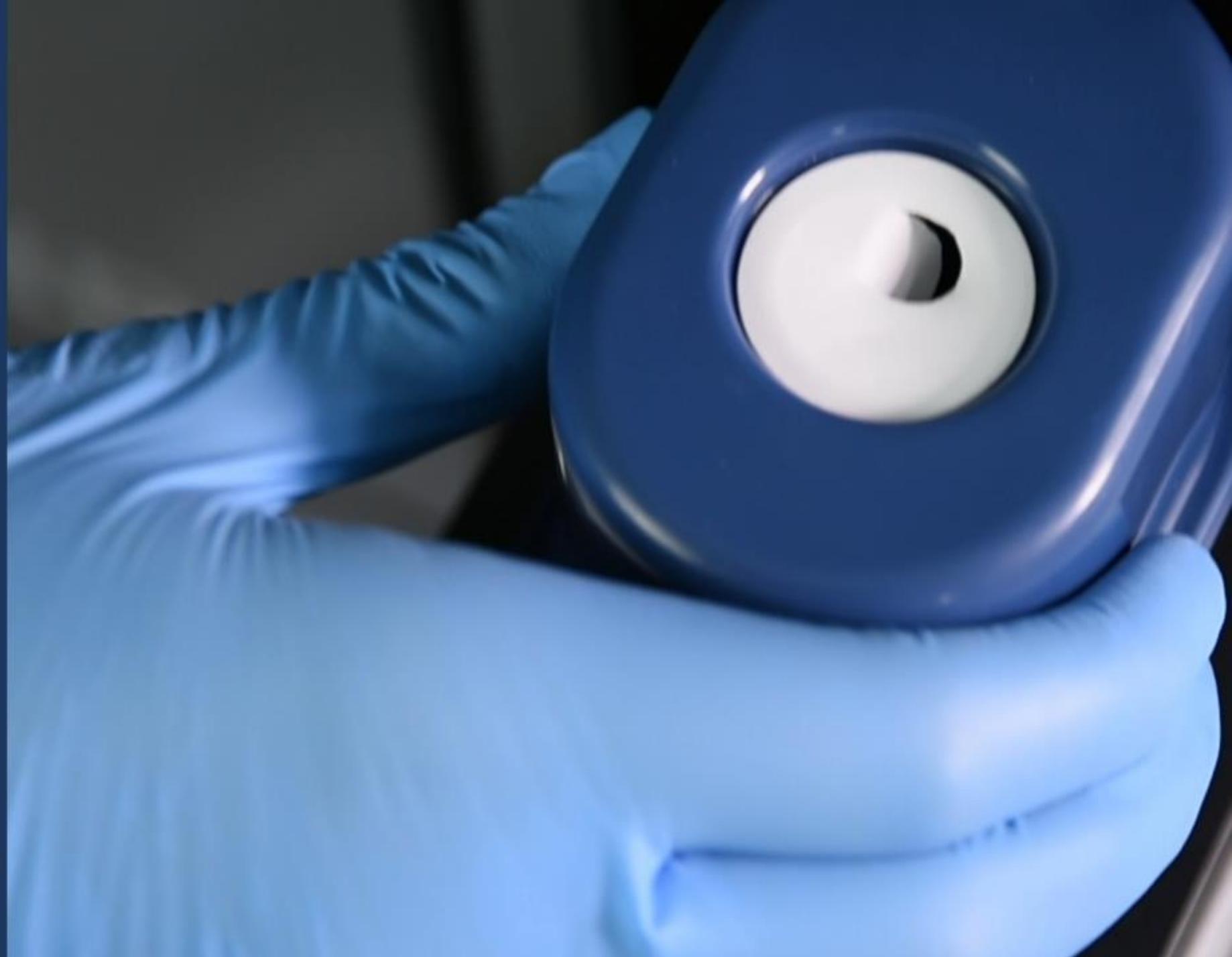



Substituição do BluKat®

3. REMOVENDO O BLUKAT® DO ESTERILIZADOR

- Puxe a porta para acessar o cartucho do BluKat®.
- Retire o cartucho.
- Siga as recomendações locais para o descarte de cartuchos vazios.






Substituição do BluKat®

4. REMOVENDO O NOVO BLUKAT® DA CAIXA

- Abra a caixa e siga as instruções.

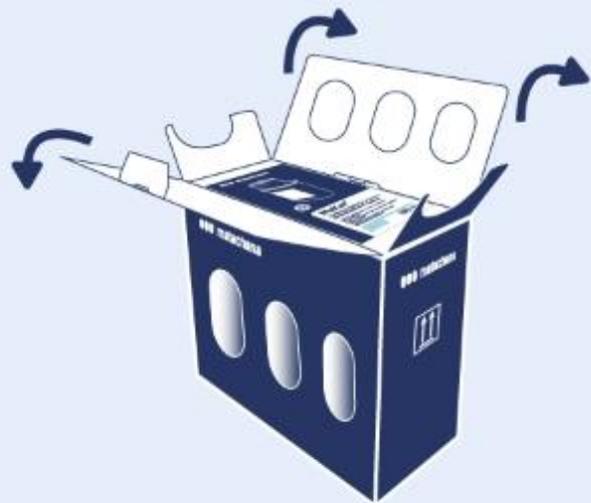

●●● matachana






Substituição do BluKat®

4. REMOVENDO O NOVO BLUKAT® DA CAIXA

- Abra a caixa e siga as instruções.



●●● matachana

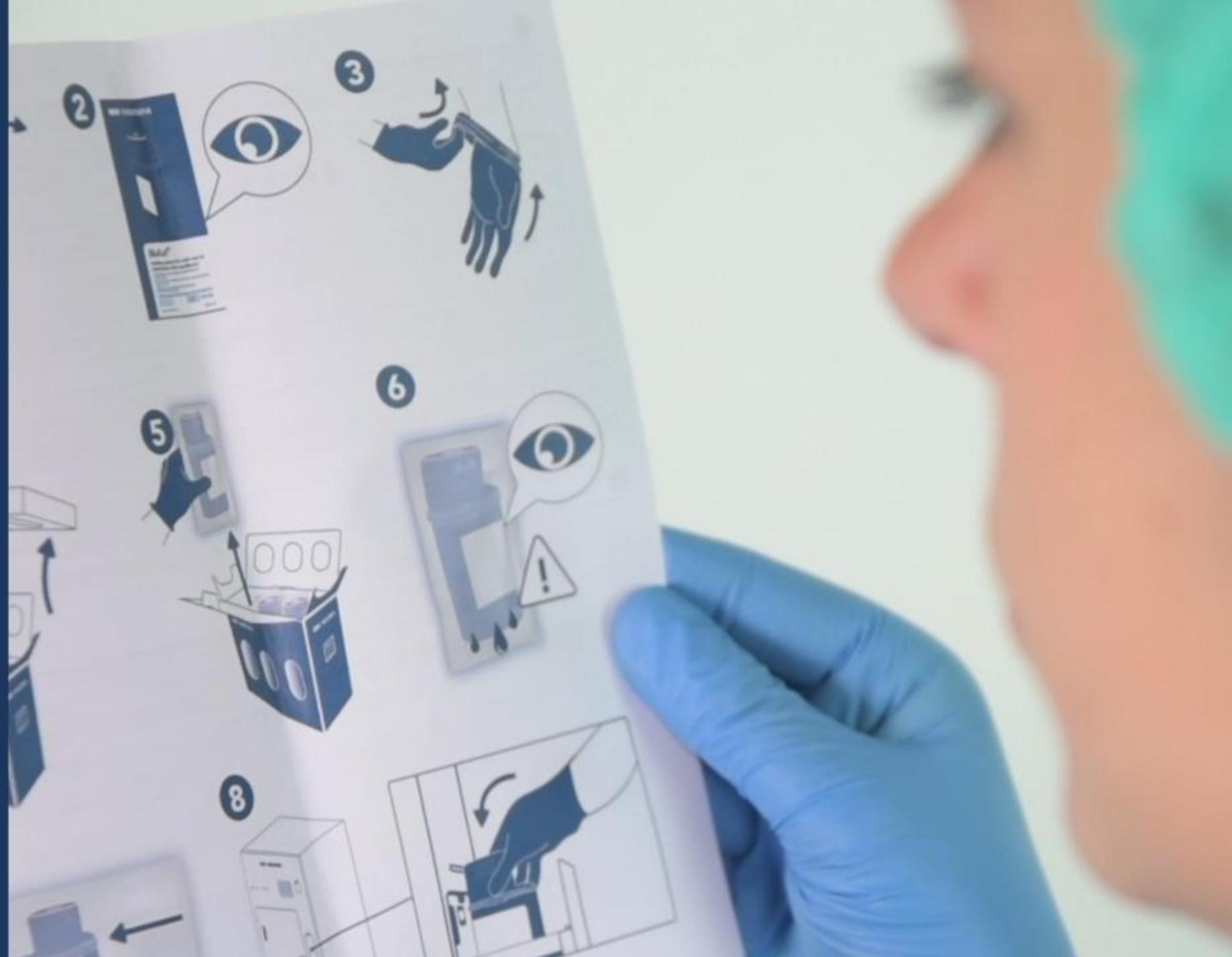



Substituição do BluKat[®]

4. REMOVENDO O NOVO BLUKAT[®] DA CAIXA

- Abra a caixa e siga as instruções.



●●● matachana





Substituição do BluKat®

4. REMOVENDO O NOVO BLUKAT® DA CAIXA

- Abra a caixa e siga as instruções.



●●● matachana





Substituição do BluKat®

4. REMOVENDO O NOVO BLUKAT® DA CAIXA

- Abra a caixa e siga as instruções.





Substituição do BluKat®

5. COLOCANDO O NOVO BLUKAT® NO ESTERILIZADOR

- Pressione o ícone para abrir o compartimento do BluKat®.
- Utilize luvas.
- Introduza o BluKat® na gaveta se certificando de posicioná-lo na posição correta.



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



BluKat



Número do lote:

Data de validade:

Restam: ciclos Validade: dias





Substituição do BluKat®

5. COLOCANDO O NOVO BLUKAT® NO ESTERILIZADOR

- Pressione o ícone para abrir o compartimento do BluKat®.
- Utilize luvas.
- Introduza o BluKat® na gaveta se certificando de posicioná-lo na posição correta.





Substituição do BluKat®

5. COLOCANDO O NOVO BLUKAT® NO ESTERILIZADOR

- Pressione o ícone para abrir o compartimento do BluKat®.
- Utilize luvas.
- Introduza o BluKat® na gaveta se certificando de posicioná-lo na posição correta.

●●● matachana





Substituição do BluKat®

5. COLOCANDO O NOVO BLUKAT® NO ESTERILIZADOR

- Empurre a gaveta para fechá-la.
- Automaticamente, o esterilizador fará a leitura do tag de RFID.
- Novas informações do BluKat® serão exibidas.





Substituição do BluKat®

5. COLOCANDO O NOVO BLUKAT® NO ESTERILIZADOR

- Empurre a gaveta para fechá-la.
- Automaticamente, o esterilizador fará a leitura do tag de RFID.
- Novas informações do BluKat® serão exibidas.





Substituição do BluKat®

5. COLOCANDO O NOVO BLUKAT® NO ESTERILIZADOR

- Empurre a gaveta para fechá-la.
- Automaticamente, o esterilizador fará a leitura do tag de RFID.
- Novas informações do BluKat® serão exibidas.



Tca
52.8 °C

Pca
1007.4 hPa



BluKat



Número do lote: 18001
Data de validade: 07-2021
Restam: 30 ciclos Validade: 30 dias



© **ANTONIO MATACHANA, S.A.** 2020

DIREITOS AUTORAIS

Todos os direitos reservados. Este conteúdo é de propriedade intelectual de Antonio Matachana, S.A. A reprodução total ou parcial das informações é estritamente proibida, assim como sua tradução, cópia ou manipulação por qualquer meio ou em qualquer formato de mídia sem a autorização expressa do proprietário dos direitos. O uso não autorizado e qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual ou industrial de Antonio Matachana, S.A. resultarão em uma ação legal.

CONTEÚDO

Este é um vídeo promocional. Devido à constante evolução de nossos equipamentos, o conteúdo deste documento pode sofrer algumas alterações.